



FOURS MATIÈRES VOLATILES

VMF

carbolite.com/fr/produits/fours-pour-essais-charbon-coke/vmf-fours-matieres-volatiles/

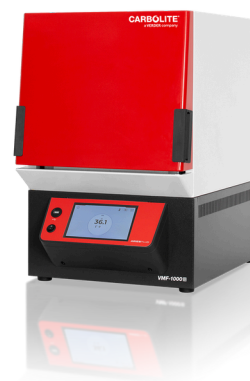
VMF**FOURS MATIÈRES VOLATILES**

Le four VMF est spécialement conçu pour tester les matières volatiles du charbon.

VMF / ASTM ET VMF 10/6

VMF / ASTM : pour tester selon ASTM D3175-11. Complet avec creuset, couvercle et support.

VMF 10/6 : porte relevable verticale à fermeture douce. Passages afin d'introduire des thermocouples sans gaine, afin de les positionner en dessous de chaque creuset.

**VMF****CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

- | VMF / ASTM pour tester selon ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM complet avec creuset, couvercle et support
- | VMF 10/6 porte relevable verticale à fermeture douce
- | VMF 10/6 – passages afin d'introduire des thermocouples sans gaine, afin de les positionner en dessous de chaque creuset



VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPTIONS

À préciser à la commande.

- | Accessoires de creusets et couvercles disponibles
- | 4 portes-creuset avec poignée de chargement (pour VMF 10/6)
- | Protection contre la surchauffe
- | Communication numérique ou enregistreur graphique nanodac sans papier pour fournir une preuve documentaire de la procédure de test (pour VMF 10/6)
- | En option sonde de thermocouple calibré avec indicateur numérique (pour VMF 10/6)

VMF

CREUSETS ET SUPPORTS



Support pour 4 creusets en option + 4 creusets avec couvercles (VMF 10/6)



En option creuset avec couvercle (VMF 10/6)



Creuset & couvercle en Inconel résistant à la corrosion et à l'oxydation (VMF/ASTM) – fourni avec le four



PORTE-CREUSET

Porte-creuset standard avec creuset & couvercle (VFM/ASTM) – fourni avec le four.

VMF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VMF 10/6

Temp max (°C)	1000
Température maximale en service continu (°C)	950
Type	Chargement frontal
Temps de chauffe (min)	20 à 900°C
Dimensions : Interne H x L x P (mm)	100 x 210 x 260
Dimensions : Externe H x L x P (mm)	670 x 435 x 608
Puissance max (W)	3000
Type de thermocouple	K
Poids (kg)	47
Alimentation électrique	220 – 240V, 50–60Hz, monophasé, 13A

VMF/ASTM

Temp max (°C)	1000
Température maximale en service continu (°C)	1000
Type	Chargement par le haut
Temps de chauffe (min)	—
Dimensions : Interne (mm)	50 x 100
Dimensions : Externe H x L x P (mm)	330 x 410 x 300
Puissance max (W)	950
Type de thermocouple	N
Poids (kg)	9
Alimentation électrique	220 – 240V, 50 – 60Hz, monophasé et neutre, alimentation avec mise à la terre, 4A

VMF

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT VMF → carbolite.com/files/450841/fiche-produit-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

NOUS CONTACTER →

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

DEMANDE DE DEVIS →

carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/fr/produits/fours-pour-essais-charbon-coke/vmf-fours-matieres-volatiles/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections