


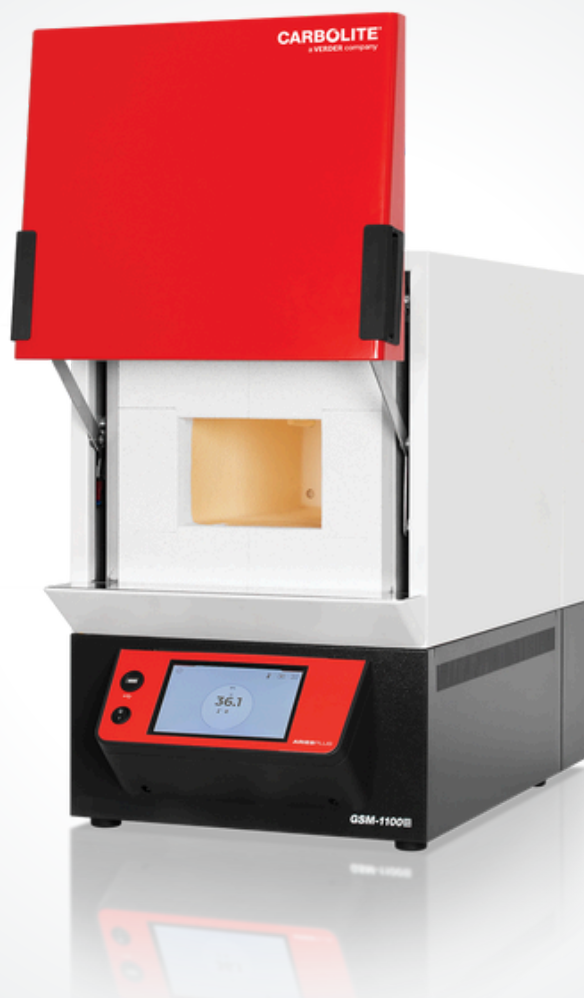

FOURS À CALCINATION POUR VAPEURS CORROSIVES

GSM

www.carbolite.com/fr/produits/fours-a-chambre/fours-a-chambre-a-calcination/gsm/


GSM

FOURS À CALCINATION POUR VAPEURS CORROSIVES

Certaines techniques d'analyse peuvent être affectées par les poussières d'alumine ou de silice (Al_2O_3 à SiO_2) – les matériaux normalement utilisés pour construire les chambres de four. Pour éviter cela, la chambre du four GSM est construite à partir d'un matériau de quartz fondu.

Cette conception offre également un confinement supérieur de vapeurs agressives et corrosives telles que les acides sulfuriques, nitriques et chlorhydriques en les maintenant à l'écart des éléments de chauffage.

En outre, si une entrée de gaz optionnelle est spécifiée, la conception fermée minimise les fuites de gaz de la chambre.

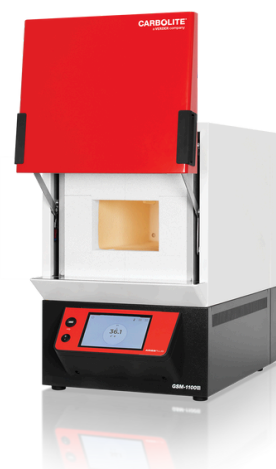**GSM**

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- | 1100°C température maximum d'opération
- | Régulateur Carbolite PID 301, avec rampe unique à consigne et minuterie
- | Chambre du four en quartz fondu, idéal pour l'analyse où Al_2O_3 et SiO_2 pourraient contaminer les résultats des tests
- | Revêtement de la chambre offre un confinement supérieur de vapeurs corrosives et agressives comme H_2SO_4 , HNO_3 , HCL
- | Bouchon de porte en fibre céramique moulée
- | 4 cotés chauffés (2 cotés, toit, foyer)

GSM**OPTIONS**

À préciser à la commande.

- | Une gamme de régulateurs numériques sophistiqués, multisegments et d'enregistreurs de données avec des options de communication numérique est disponible – plus d'informations sur les régulateurs
- | Entrée de gaz pour atmosphères modifiées (la doublure de quartz fondu offre un meilleur confinement)
- | Plateaux & supports d'échantillons

GSM**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle	GSM 11/8
Temp max (°C)	1100
Temps de chauffe (min)	70
Température max pour utilisation en continue (°C)	1000
Dimensions: Interne H x L x P (mm)	120 x 175 x 345
Dimensions: Externe H x L x P (mm)	670 x 435 x 750
Dimensions: Externe avec porte ouverte H x L x P (mm)	915 x 435 x 805
Dimensions: Hauteur au sommet de la cheminée (mm)	1070
Volume (litres)	8
Puissance max (W)	3050
Puissance de maintien à température (W)	1700
Type de thermocouple	K
Poids (kg)	57

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT GSM → carbolite.com/files/450847/fiche-produit-gsm.pdf

SCHÉMA GSM 11/8 → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

NOUS CONTACTER →

www.carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

DEMANDE DE DEVIS →

www.carbolite.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

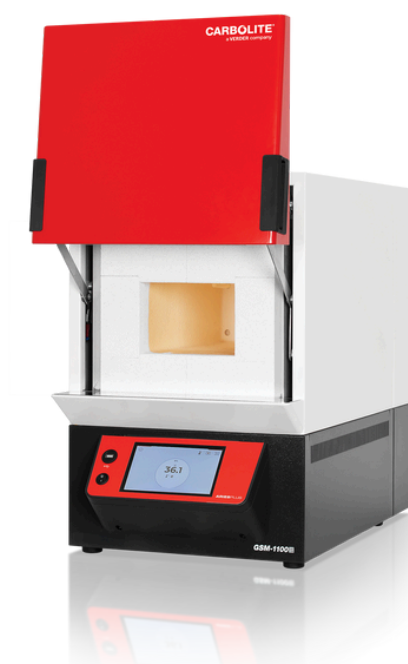

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/fr/produits/fours-a-chambre/fours-a-chambre-a-calcination/gsm/