


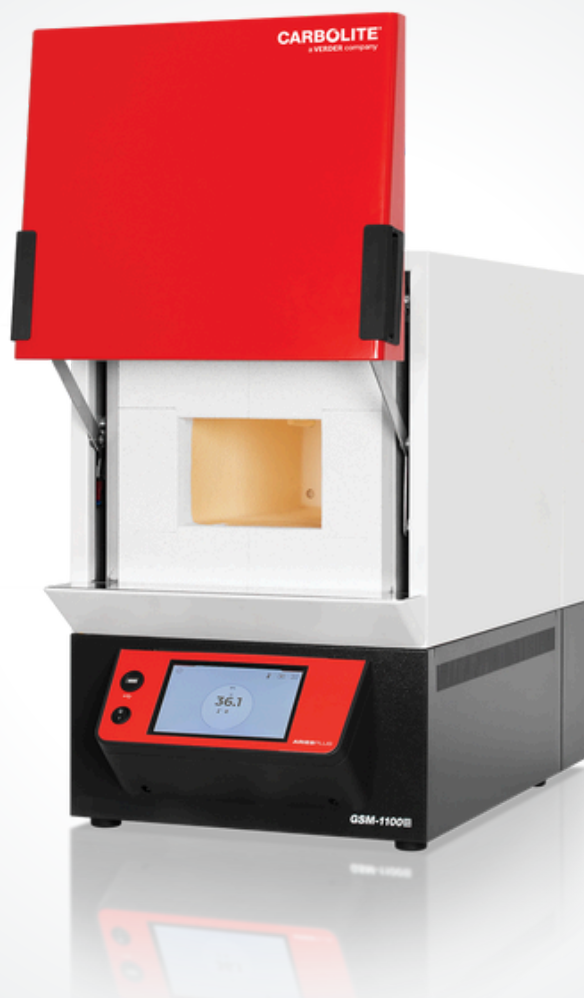

HORNOS DE CALCINACIÓN DE PRECISIÓN

GSM


www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-incineracion-laboratorio/gsm/

GSM

HORNOS DE CALCINACIÓN DE PRECISIÓN

Algunos procesos analíticos se ven afectados por las fibras de aluminio u óxido de silicio empleadas frecuentemente en el material aislante de los hornos. Para evitar la contaminación de la muestra debido al polvo desprendido del aislamiento, la cámara de los hornos GSM es de sílice fundida.

Este diseño protege las resistencias contra gases agresivos y/o corrosivos tales como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el ácido clorhídrico, y reduce la fuga de gases de purga (si es que se ha instalado una entrada de gas opcional).

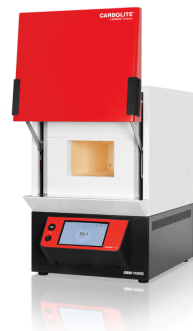**GSM**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- | Temperatura máxima hasta 1100 °C
- | Cámara tipo mufla en sílice fundida maciza que evita contaminaciones de la muestra con Al_2O_3 o SiO_2
- | Puerta con aislamiento de fibra de cerámica moldeada
- | Controlador Carbolite 301 con programación de rampa, valor de consigna y temporizador
- | Mayor protección contra gases agresivos y corrosivos como H_2SO_4 , HNO_3 o HCl gracias a la construcción especial de la cámara en sílice fundida
- | Calefacción por 4 lados (2 lados, techo, solera)

GSM

EQUIPAMIENTO / OPCIONES / ACCESORIOS

- Amplia selección de controladores digitales, programadores multisección y registradores de datos con diversas opciones en cuanto a los protocolos de comunicación digital - Más información
- Entrada de gas para el trabajo con atmósfera modificada
- Bastidor y bandejas

GSM

DATOS TÉCNICOS

Modelo	GSM 11/8
Temp. máx. (°C)	1100
Tiempo de calentamiento (min)	70
Temperatura máxima de operación continuo (°C)	1000
Medidas: interior H x A x F (mm)	120 x 175 x 345
Medidas: exterior H x A x F (mm)	670 x 435 x 750
Medidas: exterior, con puerta abierta, H X A x F (mm)	915 x 435 x 805
Dimensiones: altura de la chimenea (mm)	1070
Volumen de cámara (litros)	8
Potencia máx. (W)	3050
Potencia mantenim. (W)	1700
Termopar tipo	K
Peso (kg)	57

DESCARGAS

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO GSM → carbolite.com/files/450936/hoja-de-datos-del-producto-gsm.pdf

LABORATORY/INDUSTRIAL OVENS & FURNACES → carbolite.com/files/12830/laboratory-industrial-ovens-furnaces.pdf

GSM 11/8 WITH NO CONTROLS SECTION → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

CONTACTO →

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

PEDIR UN PRESUPUESTO →

www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

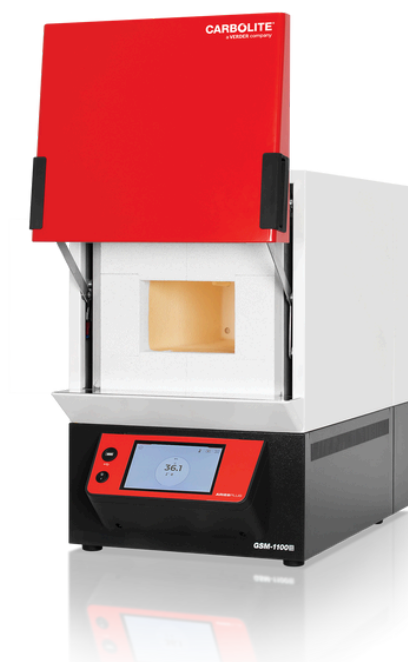

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-incineracion-laboratorio/gsm/