



HORNOS DE CALCINACIÓN CON POSTCOMBUSTIÓN

ABF

www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-incineracion-laboratorio/abf/

ABF

HORNOS DE CALCINACIÓN CON POSTCOMBUSTIÓN

El ABF es un horno de calcinación con un sistema térmico de postcombustión, especialmente apropiado para grandes cantidades de muestra. Este aparato es ideal para materiales que liberan mucho humo, tales como la biomasa.

El horno de calcinación consta de una cámara principal grande equipada normalmente con 2 cestillos apilables y una cámara de postcombustión.

En esta última se inyectan grandes cantidades de aire a los gases de combustión provenientes de la cámara principal para quemar las partículas de hollín que estos contienen.



ABF

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- | Temperatura máxima de 800 °C en la cámara de calcinación
- | Cámara de 28 litros
- | Postcombustión de hasta 40 g de carbono por cada calcinación
- | Cestillos apilables con bandeja de carga y mango
- | Controlador programador EPC3016P1
- | Control independiente de la temperatura de postcombustión hasta 950 °C
- | Resistencias cubiertas con placas macizas de carburo de silicio
- | De forma estándar para corriente trifásica
- | Conexión Ethernet

ABF

EQUIPAMIENTO / OPCIONES / ACCESORIOS


- | Ampla selección de controladores digitales, programadores multisección y registradores de datos con diversas opciones en cuanto a los protocolos de comunicación digital – **MÁS INFORMACIÓN** → www.carbolite.com/es/productos/controladores-de-temperatura/
- | Protección digital contra sobre temperatura (recomendada para la operación sin vigilancia), libremente ajustable, para la protección del aparato y la muestra
- | De forma opcional con soporte

ABF

DETALLES TÉCNICOS

CIRCULACIÓN DE AIRE EN LOS HORNOS ABF 8/28

- 1** | Entrada de aire – el aire es precalentado antes de entrar a la cámara
- 2** | Entrada separada de aire al sistema de postcombustión para garantizar una combustión completa
- 3** | Entrada de aire a la cámara distribuidora de aire, donde es enfriado antes de ser extraído por la turbina
- 4** | Chimenea
- 5** | Cámara del horno
- 6** | Sistema de postcombustión
- 7** | Turbina de aspiración
- 8** | Cestillos apilables

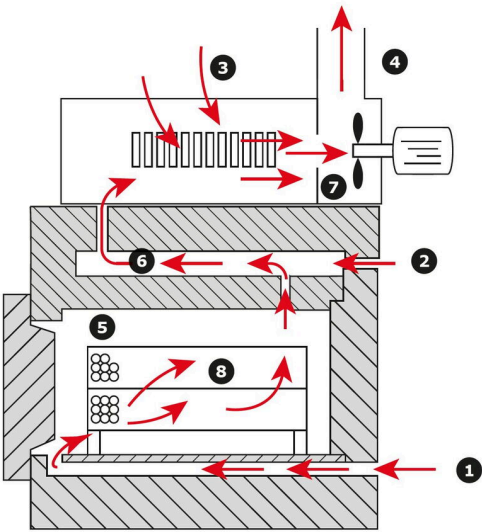

ABF 8/28

DATOS TÉCNICOS

Temp. máx. (°C)	800
Temperatura máxima de operación continuo (°C)	700
Medidas: interior H x A x F (mm)	210 x 290 x 445
Medidas: exterior H x A x F (mm)	980 x 600 x 750
Dimensiones: altura de la chimenea (mm)	1150
Configuración	modelo de sobremesa
Volumen de cámara (litros)	28
Potencia máx. (W)	8000
Potencia mantenim. (W)	3828
Termopar tipo	K
Peso (kg)	120

ABF

CONTACTO

[www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B)

PEDIR UN PRESUPUESTO

[www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B)



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/es/productos/hornos-de-camara/hornos-incineracion-laboratorio/abf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections