



FORNACI PER SOSTANZE VOLATILI

VMF

carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/vmf-fornaci-per-sostanze-volatili/


VMF**FORNACI PER SOSTANZE VOLATILI**

Il VMF è stato appositamente progettato per le prove sulle sostanze volatili di carbone.

DUE CONFIGURAZIONI DEL FORNO

VMF / ASTM: per test con ASTM D3175-11, completo di crogiolo, coperchio e supporto.


VMF 10/6: chiusura ammortizzata, porta ad alzata verticale; le porte di calibrazione consentono di posizionare termocoppie non schermate sotto ogni crogiolo.

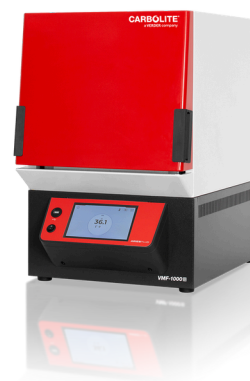**VMF****CARATTERISTICHE STANDARD**

- | VMF / ASTM per test con ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM completo di crogiolo, coperchio e supporto
- | VMF 10/6 chiusura ammortizzata, porta ad alzata verticale
- | Le porte di calibrazione della VMF 10/6 consentono di posizionare termocoppie non schermate sotto ogni crogiolo



VMF 10/6

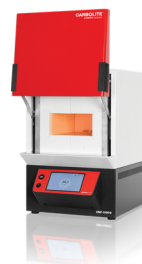

VMF 10/6

VMF

OPZIONI

Da specificare al momento dell'ordine.

- | Disponibili accessori crogioli e coperchi
- | Rack per 4 crogioli con maniglia di caricamento (per VMF 10/6)
- | Protezione superamento temperatura
- | Comunicazione digitale o nanodac per registrare e fornire evidenza della procedura del test (per VMF 10/6)
- | Sonda opzionale calibrata su termocoppia con indicatore digitale (per VMF 10/6)

VMF

CROGIOLI E SUPPORTI



Supporto opzionale per 4 crogioli + 4 crogioli con coperchi (VMF 10/6)



Crogiolo opzionale con coperchio (VMF 10/6)



Crogiolo e coperchio in inconel resistenti alla corrosione e all'ossidazione (VMF / ASTM) – forniti con il forno



SUPPORTO PER CROGIOLO A FILO

Supporto per crogiolo a filo standard con crogiolo e coperchio (VFM / ASTM) – fornito con il forno.

VMF

DATI TECNICI

VMF 10/6

Temperatura massima (°C)	1000
Massima temperatura di esercizio in continuo (°C)	950
Tipo	Caricamento frontale
Tempo di riscaldamento (min)	da 20 a 900°C
Dimensioni: interno H x L x P (mm)	100 x 210 x 260
Dimensioni: esterne H x L x P (mm)	670 x 435 x 608
Massima potenza (W)	3000
Tipo termocoppia	K
Peso (kg)	47
Potenza fornita	220 – 240V, 50–60Hz, mono fase, 13A

VMF/ASTM

Temperatura massima (°C)	1000
Massima temperatura di esercizio in continuo (°C)	1000
Tipo	Caricamento dall'alto
Tempo di riscaldamento (min)	Non specificato
Dimensioni: interno (mm)	50 x 100
Dimensioni: esterne H x L x P (mm)	330 x 410 x 300
Massima potenza (W)	950
Tipo termocoppia	N
Peso (kg)	9
Potenza fornita	220 – 240V, 50 – 60Hz, mono fase con supporto neutrale massa a terra, 4A

VMF

SCARICA

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO VMF → carbolite.com/files/451038/scheda-tecnica-del-prodotto-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

CONTATTACI →

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

RICHIEDI QUOTAZIONE →

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/it/prodotti/coal-coke-test-equipment/vmf-fornaci-per-sostanze-volatili/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections