


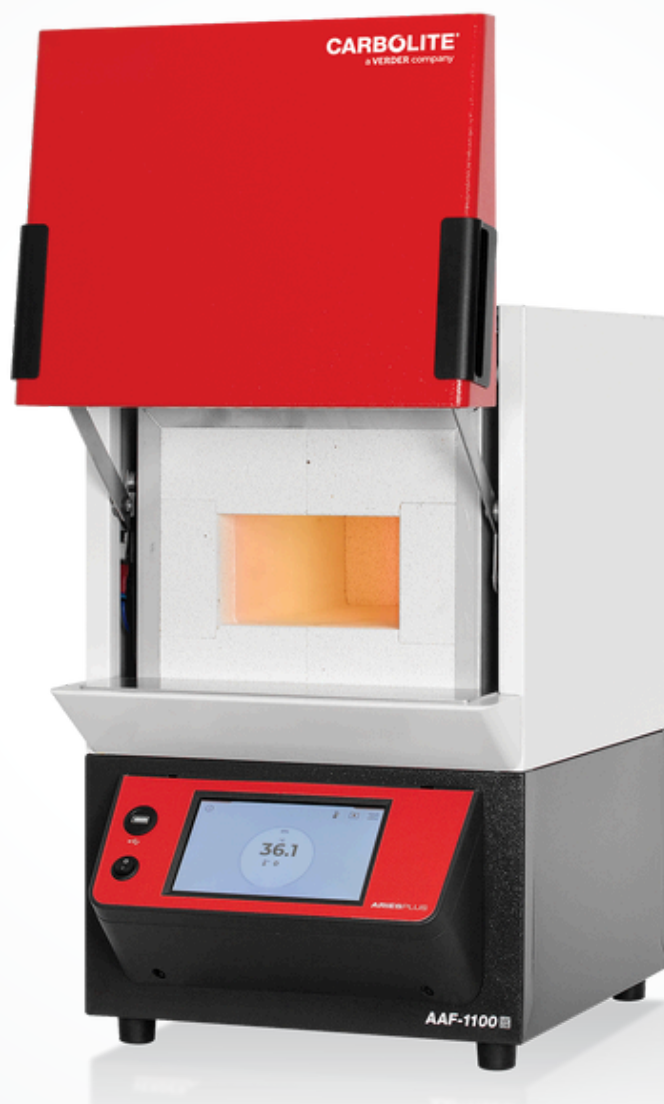

FORNI PER INCENERIMENTO

AAF – 3 & 7 LITRES

carbolite.com/it/prodotti/fornaci/fornaci-per-incenerimento/aaf-11-3-11-7/

AAF – 3 & 7 LITRES

FORNI PER INCENERIMENTO

Le fornaci ad incenerimento AAF, sono una serie di forni che sono stati progettati specificamente per fornire condizioni ottimali di incenerimento, in modo da garantire la completa combustione del campione.

I forni per incenerimento AAF 11/3 e AAF 11/7 forniscono un flusso continuo di aria pre riscaldata attraverso la camera, e sono progettati e costruiti in conformità alle norme ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 e ASTM D4422.



AAF – 3 & 7 LITRES

CARATTERISTICHE STANDARD

- | Temperature di esercizio massime di 1100 ° C
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Ideale per incenerimento di alimenti, plastiche, carboni ed altri materiali carboniosi
- | Progettato per essere conforme a ISO 1171: 2010, ASTM D3174-04: 2010 e ASTM D4422
- | Elementi riscaldanti sono protetti contro eventuali agenti chimici e meccanici da un robusto rivestimento a base di allumina
- | Riscaldamento su 4 lati (2 lati, parte superiore e focolare)
- | L'Ingresso di aria e l'alto camino garantiscono un cambio del flusso d'aria 4/5 volte al minuto
- | Ridotta altezza della camera tiene il flusso d'aria vicino ai campioni per una combustione ottimale
- | Elementi potenti con avvolgimento graduato compensano la perdita di calore a causa di elevato flusso d'aria
- | Preriscaldamento di aria prima che entri nella camera garantisce uniformità eccellente
- | Vassoio per campioni e maniglia di caricamento
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF – 3 & 7 LITRES

OPZIONI

Specificare all'ordine.

- | È disponibile una gamma di sofisticati controller digitali, programmatori multisegmento e data logger con opzioni di comunicazione digitale – ulteriori informazioni sui controller: carbolite.com/it/prodotti/controller/
- | Protezione da superamento temperatura (consigliata per proteggere il contenuto di valore e per operatività senza sorveglianza)
- | alimentazione monofase per AAF 11/7

AAF – 3 & 7 LITRES

ESEMPI



AAF 11/7

AAF 11/3

AAF – 3 & 7 LITRES

DATI TECNICI

Specifiche	AAF 11/3	AAF 11/7
Temperatura massima (°C)	1100	1100
Tempo di riscaldamento (min)	155	155
Massima temperatura in continuo	1000	1000
Dimensioni: Interne H x W x D (mm)	90 x 150 x 250	90 x 170 x 455
Dimensioni: Esterne H x W x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 750
Dimensioni: Esterne con porta aperta H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 805
Dimensioni: Altezza alla cima ciminiera (mm)	790	1070
Volume (litri)	3	7
Massima potenza (W)	2100	4000
Potenza di mantenimento (W)	1270	2624
Tipo termocoppia	K	K
Peso (kg)	22	63

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO → carbolite.com/files/451053/scheda-tecnica-del-prodotto-aaf-3-7-litres.pdf


AAF – 3 & 7 LITRES

CONTATTACI →

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-A

RICHIEDI QUOTAZIONE →

carbolite.com/it/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-A

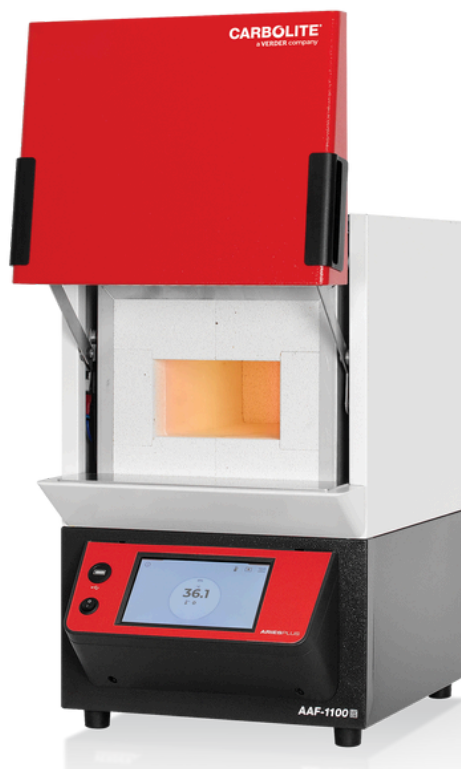

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

carbolite.com/it/prodotti/fornaci/fornaci-per-incenerimento/aaf-11-3-11-7/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections