



挥发分测定炉

VMF

carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/vmf/

VMF


挥发分测定炉

VMF 专为测定煤的挥发分而设计。

两种炉型配置

VMF / ASTM : 符合 ASTM D3175-11 标准的测试要求，配有坩埚、盖子和支架。

VMF 10/6 : 前开门式炉，配备缓闭式垂直升降炉门及校准孔，可将无保护套热电偶定位在每个坩埚下方。

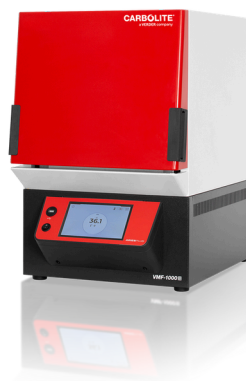


VMF


标准配置

- VMF / ASTM 符合 ASTM D3175-11 测试标准
- VMF / ASTM 配有坩埚、盖子和支架

- VMF 10/6 配备缓闭式垂直升降炉门
- VMF 10/6 设有校准孔，可将无保护套热电偶定位于每个坩埚下方

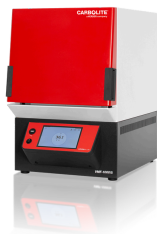

VMF 10/6，炉门关闭

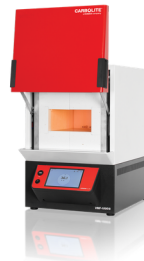

VMF 10/6，炉门打开

VMF

选配件

请在订购时注明。

- 可选配坩埚和盖子
- 带装载手柄的四坩埚支架（适用于 VMF 10/6）
- 超温保护
- 数字通信接口或 nanodac 无纸记录仪，可提供测试过程的记录证明（适用于 VMF 10/6）
- 可选配带数字显示器的已校准热电偶探头（适用于 VMF 10/6）

VMF

坩埚及支架



可选配四坩埚支架及四个带盖坩埚（VMF 10/6）



可选配带盖坩埚（VMF 10/6）



耐腐蚀、抗氧化的 Inconel 合金坩埚及盖子（VMF/ASTM），随炉提供



金属丝坩埚支架

标准金属丝坩埚支架，图示带坩埚及盖子（VFM/ASTM），随炉提供。

VMF

技术参数

VMF 10/6

最高温度 (°C)	1000
最高连续工作温度 (°C)	950
类型	前开门式
升温时间 (分钟)	20 分钟升至 900°C
内部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	100 × 210 × 260
外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	670 × 435 × 608
最大功率 (W)	3000
热电偶类型	K
重量 (kg)	47
电源	220 – 240V，50–60Hz，单相，13A

VMF/ASTM

最高温度 (°C)	1000
最高连续工作温度 (°C)	1000
类型	顶部装载式
升温时间 (分钟)	未注明
内部尺寸 (mm)	50 × 100
外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	330 × 410 × 300
最大功率 (W)	950
热电偶类型	N
重量 (kg)	9
电源	220 – 240V，50 – 60Hz，单相和中性线供电，配保护接地连接，4A

VMF

资料下载

VMF 产品数据表 → carbolite.com/files/450769/product-data-sheet-vmf.pdf

煤、焦炭及铁矿石测试炉 → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

联系我们 →

carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

索取报价 →

carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/cn/products/coal-coke-test-equipment/vmf/

© Carbolite Gero – carbolite.com / 内容可能会有所修改或更正