


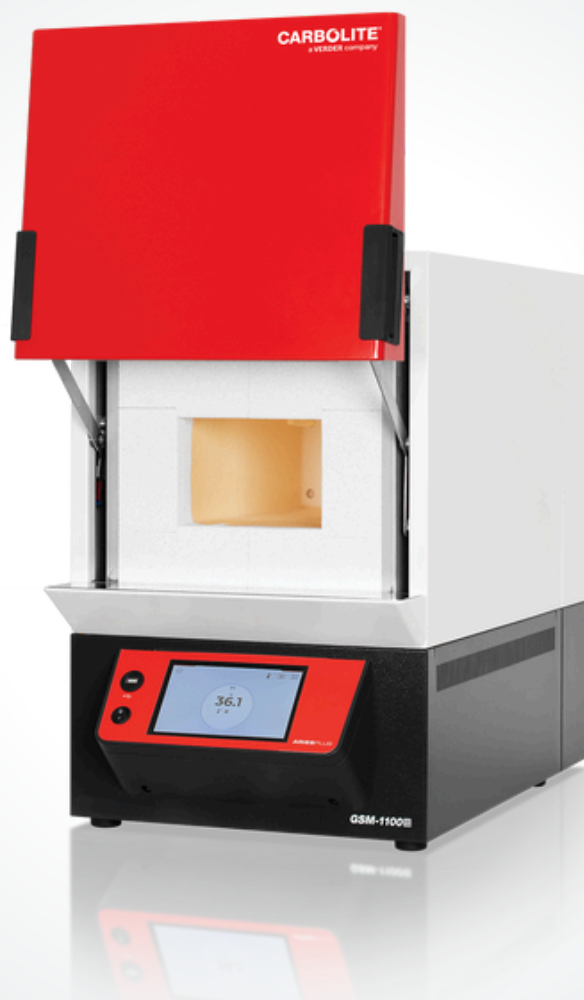

灰化炉

GSM

www.carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/gsm/


GSM

灰化炉

某些分析技术可能受到氧化铝或二氧化硅粉尘 (Al_2O_3 和 SiO_2) 的影响，这些材料通常用于制造炉膛。为避免这种情况，GSM 炉膛采用熔融石英材料制成。

这种设计还可使硫酸、硝酸和盐酸等腐蚀性和侵蚀性蒸气远离加热元件，从而实现更好的隔离。

此外，如果选配气体入口，封闭式设计可最大限度减少炉膛内的气体泄漏。

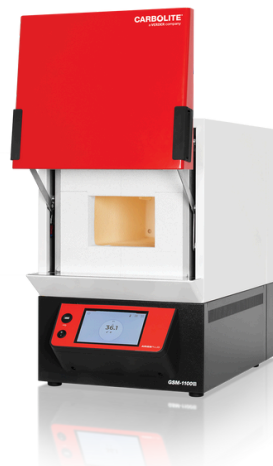

GSM

标准配置

- 最高工作温度 1100°C
- Carbolite 301 控制器，具有单段升温至设定温度及过程计时器功能
- 熔融石英炉膛，适用于 Al_2O_3 或 SiO_2 可能污染测试结果的分析
- 炉膛内衬可更好地阻隔 H_2SO_4 、 HNO_3 、 HCl 等腐蚀性和侵蚀性蒸气
- 模制陶瓷纤维炉门塞
- 四面加热（两侧、顶部及炉底）

GSM

可选配置

请在订购时注明。

- 提供一系列先进的数字控制器、多段程序控制器及数据记录仪，并可选配数字通信功能
- 用于改性气氛的气体入口（熔融石英内衬可提供更好的气体密封性）
- 样品托盘及样品架

GSM

技术参数

型号	GSM 11/8
最高温度 (°C)	1100
升温时间 (分钟)	70
最高连续工作温度 (°C)	1000
内部尺寸 高 × 宽 × 深 (mm)	120 × 175 × 345
外部尺寸 高 × 宽 × 深 (mm)	670 × 435 × 750
炉门打开时的外部尺寸 高 × 宽 × 深 (mm)	915 × 435 × 805
至烟囱顶部的高度 (mm)	1070
容积 (升)	8
最大功率 (W)	3050
保温功率 (W)	1700
热电偶类型	K
重量 (kg)	57

下载

GSM 产品数据表 → carbolite.com/files/450751/product-data-sheet-gsm.pdf

GSM 11/8 图纸 → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

联系我们 →

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

索取报价 →

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

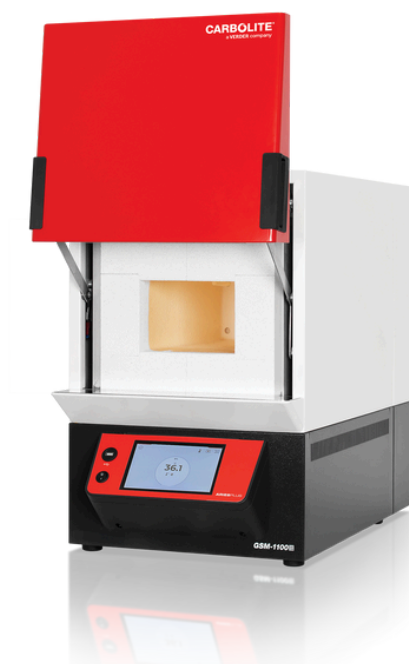

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/gsm/