


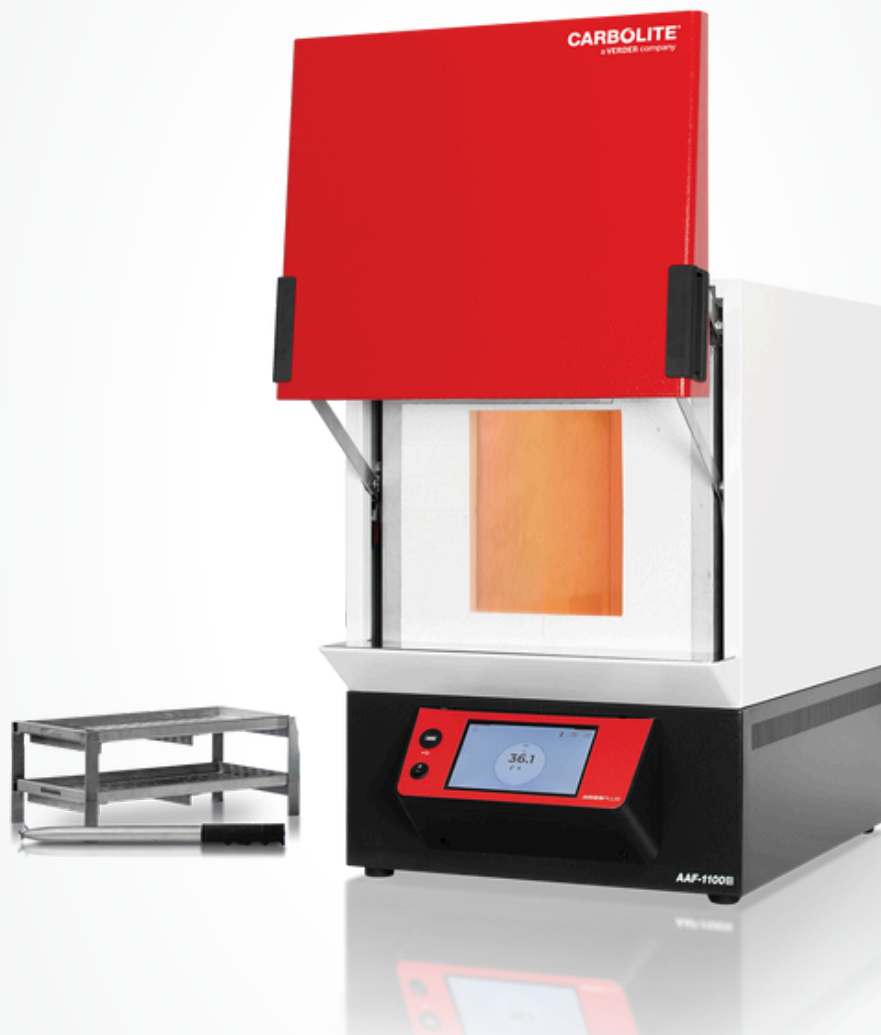

灰化炉

AAF – 18 & 32 升


www.carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/aaf-18-32-litres/

AAF – 18 & 32 升

灰化炉

AAF 系列灰化炉专为提供理想的灰化条件而设计，确保样品完全燃烧。

对于灰化与其他热处理作业交替进行的实验室，AAF 12/18 和 AAF 12/32 灰化炉兼具 AAF 设计的所有优点，最高工作温度更达到 1200 °C。

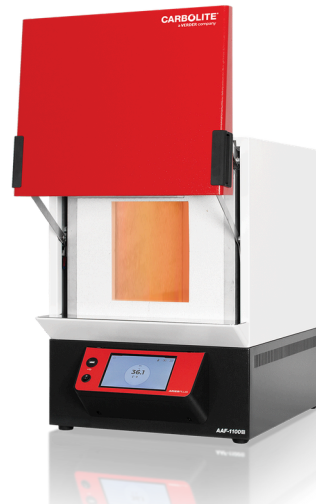

AAF – 18 & 32 升

标准配置

- | 最高工作温度为 1100 °C 和 1200 °C
- | 可编程 EPC3016P1 控制器
- | 双层支架系统，使样品容量增加一倍
- | 配备样品盘和装载手柄，可容纳大量样品
- | 适用于食品、塑料、煤炭及其他碳氢化合物材料的灰化
- | 空气进入炉膛前进行预热
- | 使用碳化硅板保护加热元件，防止积碳或腐蚀性气氛造成损害
- | 双面加热
- | 缓闭炉门保护隔热材料

AAF – 18 & 32 升

可选配置

请在订购时指定。

- 可选配各种先进的数字控制器、多段程序控制器及带数字通信功能的数据记录仪。有关控制器的更多信息：
www.carbolite.com/products/control-options/
- 超温保护装置（建议选用，以保护贵重样品并保障无人值守运行）

AAF – 18 & 32 升

产品示例



AAF – 18 & 32 升

技术参数

参数	AAF 11/18	AAF 11/32	AAF 12/18	AAF 12/32
最高温度 (°C)	1100	1100	1200	1200
升温时间 (分钟)	70	--	70	--
最高连续工作温度 (°C)	1000	1000	1100	1100
内部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	235 × 196 × 400	250 × 280 × 450	235 × 196 × 400	250 × 280 × 450
外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	715 × 505 × 680	820 × 690 × 775	715 × 505 × 680	820 × 690 × 775
炉门打开时外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	1000 × 505 × 765	1115 × 690 × 910	1000 × 505 × 765	1115 × 690 × 910
至烟囱顶部的高度 (mm)	1000	1510	1000	1510
容积 (升)	18	32	18	32
最大功率 (W)	7080	9000	7080	9000
保温功率 (W)	3500	----	3500	----
热电偶类型	K	R	R	R
重量 (kg)	70	100	70	100


AAF – 18 & 32 升

联系我们 →

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E

索取报价 →

www.carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E

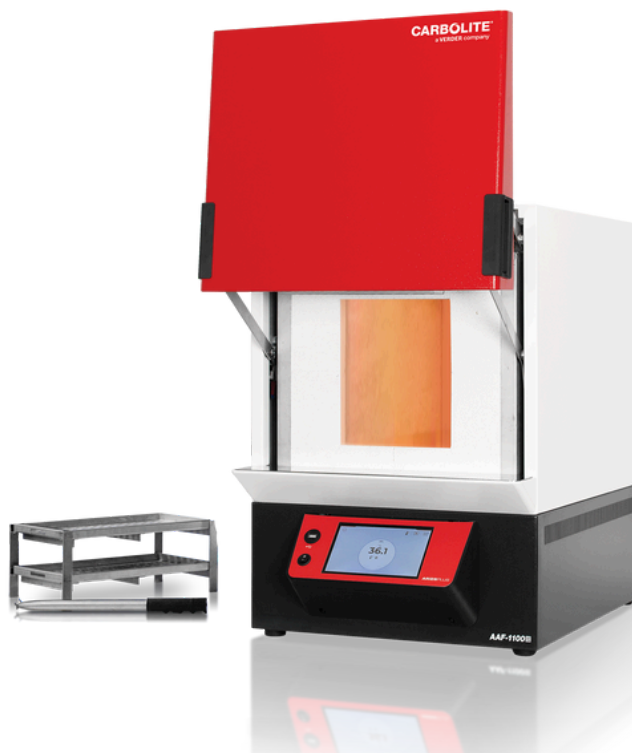

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/aaf-18-32-litres/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / 内容可能会修改或更正