


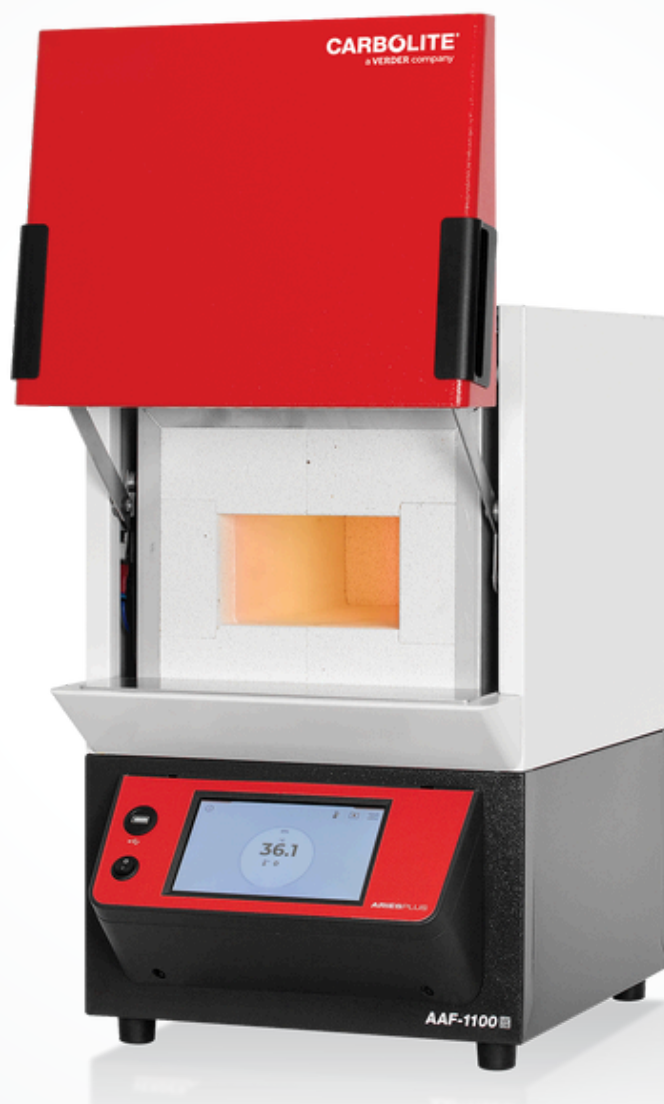

灰化炉

AAF – 3 & 7 升


carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/aaf-3-7-litres/

AAF – 3 & 7 升

灰化炉

AAF 系列灰化炉专为提供最佳灰化条件而设计，确保样品完全燃烧。

AAF 11/3 和 AAF 11/7 灰化炉使预热空气持续流经炉膛，设计符合 ISO 1171:2010、ASTM D3174-04:2010 和 ASTM D4422 标准。

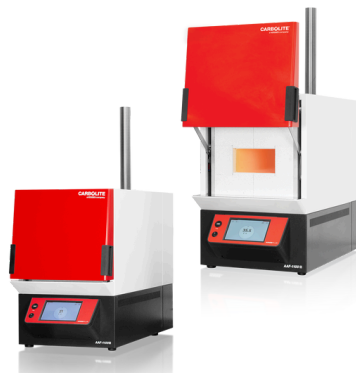

AAF – 3 & 7 升

标准配置

- | 最高工作温度 1100 °C
- | 可编程 EPC3016P1 控制器
- | 适用于食品、塑料、煤及其他碳氢化合物材料的灰化
- | 设计符合 ISO 1171:2010、ASTM D3174-04:2010 和 ASTM D4422 标准
- | 坚固耐磨的氧化铝炉衬可保护电阻丝免受化学和机械损伤
- | 四面加热（两侧、炉顶和炉底）
- | 进气口及高烟囱提供每分钟 4 至 5 次的空气置换
- | 较低的炉膛高度使气流贴近样品，以实现最佳燃烧效果
- | 大功率、分级绕制的加热元件补偿高气流造成的热损失
- | 空气进入炉膛前预热，确保出色的温度均匀性
- | 样品托盘和装载手柄
- | 缓闭炉门保护隔热材料

AAF – 3 & 7 升

可选配置

请在订购时注明。

- | 可选配多种先进的数字控制器、多段程序控制器和数据记录仪，并提供数字通信选项。控制器详情：
carbolite.com/products/control-options/
- | 超温保护（建议用于保护贵重样品及无人值守运行）
- | AAF 11/7 可选双相电源

AAF - 3 & 7 升

实例



AAF 11/7

AAF 11/3

AAF - 3 & 7 升

技术参数

参数	AAF 11/3	AAF 11/7
最高温度 (°C)	1100	1100
升温时间 (分钟)	155	155
最高连续工作温度 (°C)	1000	1000
内部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	90 × 150 × 250	90 × 170 × 455
外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	595 × 375 × 495	670 × 435 × 750
炉门开启时外部尺寸：高 × 宽 × 深 (mm)	810 × 375 × 540	915 × 435 × 805
至烟囱顶部的高度 (mm)	790	1070
容积 (升)	3	7
最大功率 (W)	2100	4000
保温功率 (W)	1270	2624
热电偶类型	K	K
重量 (kg)	22	63

产品数据表 → carbolite.com/files/450736/product-data-sheet-aaf-3-7-litres.pdf


AAF – 3 & 7 升

联系我们 →

carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-A

索取报价 →

carbolite.com/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-A

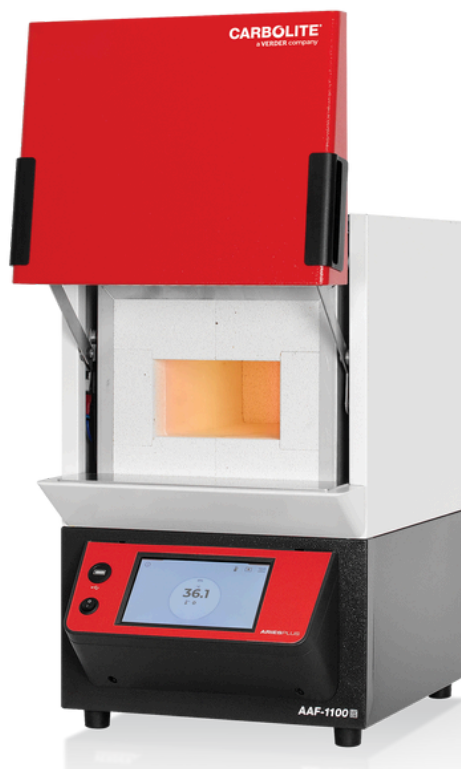

CARBOLITE[®]
a VERDER company

carbolite.com/cn/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/aaf-3-7-litres/

© Carbolite Gero – carbolite.com / 内容可能会修改或更正