



PIEC DO OZNACZANIA CZĘŚCI LOTNYCH

VMF

carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/vmf-piec-do-oznaczania-czesci-lotnych/

VMF**PIEC DO OZNACZANIA CZĘŚCI LOTNYCH**

VMF jest specjalnie zaprojektowany oznaczania zawartości substancji lotnych węgla.


DWA WARIANTY PIECA

VMF / ASTM: do badania zgodnie z ASTM D3175-11; kompletny z tygłem, pokrywą i uchwytem.

VMF 10/6: miękkie zamykanie, drzwi podnoszone pionowo; port kalibracyjny umożliwiający wprowadzenie termopary poniżej tyglów.

**VMF****CECHY OGÓLNE**

- | VMF / ASTM do badania zgodnie z ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM kompletny z tygłem, pokrywą i uchwytem
- | VMF 10/6 miękkie zamykanie, drzwi podnoszone pionowo
- | vmf 10/6 port kalibracyjny umożliwiający wprowadzenie termopary poniżej tyglów

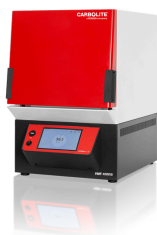

VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPCJE

Proszę określić w momencie składania zamówienia.

- | Dostępne akcesoria tj. pokrywy oraz tygle
- | 4 tygle z uchwytem załadowniczym (VMF 10/6)
- | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- | Komunikacja cyfrowa lub zapis danych w postaci wykresów przedstawiających proces analizy (VMF 10/6)
- | opcjonalnie kalibrowane termoparę z indykatorem cyfrowym (dla VMF 06/10)

VMF

TYGLE I UCHWYTY



Opcjonalny stojak na 4 tygle + 4 tygle z pokrywkami (VMF 10/6)



Opcjonalny tygiel z przykrywką (VMF 10/6)



Odporne na korozję i utlenianie tygle oraz pokrywki z inkonelu (VMF/ASTM) - dostarczane wraz z piecem



UCHWYT NA TYGIEL

Standard wire crucible holder shown with crucible & lid (VFM/ASTM) - supplied with the furnace

VMF**DANE TECHNICZNE****VMF 10/6**

Maksymalna temperatura (°C)	1000
Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C)	950
Typ	Ładowanie od przodu
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	20 min do 900 °C
Wymiary wewnętrzne pieca Wys. × Szer. × Gł. (mm)	100 × 210 × 260
Wymiary: Zewnętrzne Wys. × Szer. × Głęb.	670 × 435 × 608
Moc maksymalna (W)	3000
Termopara typu:	K
Waga (kg)	47
Zasilanie	220-240V / 1-fazowe / 13A

VMF/ASTM

Maksymalna temperatura (°C)	1000
Maksymalna temperatura pracy ciągłej (°C)	1000
Typ	Ładowane od góry
Wymiary wewnętrzne pieca (mm)	50 × 100
Wymiary: Zewnętrzne Wys. × Szer. × Głęb.	330 × 410 × 300
Moc maksymalna (W)	950
Termopara typu:	N
Waga (kg)	9
Zasilanie	220-240V / 1 - fazowe / 4A / 50-60Hz

VMF**DO POBRANIA**

KARTA PRODUKTU VMF → carbolite.com/files/451358/karta-produktu-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

KONTAKT →

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

POPROŚ O OFERTĘ →

carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/pl/produkty/piece-do-badan-wegla-i-koksu/vmf-piec-do-oznaczania-czesci-lotnych/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections