



PIECE DO SPOPIELANIA PO SPALANIU

ABF

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielania/abf/

ABF

PIECE DO SPOPIELANIA PO SPALANIU

Piec do spopielenia ABF jest szczególnie odpowiedni do spopielenia większych próbek lub materiałów, takich jak biomasa, które mogą generować znaczne ilości dymu.

Piec składa się z dużej głównej komory spalania wyposażonej standardowo w dwupoziomowy zestaw koszy na próbki.

Spaliny z głównej komory przetwarzane są przez dopalacz wysokotemperaturowy przeznaczony do dalszego przetwarzania dymów i dymu.



ABF

CECHY OGÓLNE

- | Maksymalna temperatura pracy: 800 °C - komora spopielania
- | Komora o objętości 28 litrów
- | Współczynnik spalania wynoszący ok. 40 g węgla na jeden wsad
- | dwupoziomowe kosze z tacą załadowniczą i uchwytem
- | Programowalny sterownik EPC3016P1
- | Niezależna kontrola komory ponownego spalania do 950 °C
- | Elementy grzewcze w osłonie z węgla krzemu
- | standardowo dostarczany z zasilaniem 3-fazowym
- | Komunikacja Ethernet

ABF

OPCJE

Proszę podać podczas zamawiania.


- | Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej - więcej informacji o kontrolerach: www.carbolite.com/pl/produkty/sterowanie/
- | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- | Opcjonalnie stojak podłogowy

ABF

DANE TECHNICZNE

PRZEPŁYW POWIETRZA W PIECU DO SPOIELANIA ABF 8/28

- 1** | Wlot powietrza - powietrze jest wstępnie podgrzewane przed wejściem do komory
- 2** | Wlot powietrza do dopalacza w celu zapewnienia całkowitego spalania
- 3** | Wlot powietrza do plenum w celu schłodzenia gazów przed wejściem do wentylatora wyciągowego
- 4** | Komin
- 5** | Komora pieca
- 6** | Dopalacz
- 7** | Wentylator wyciągowy
- 8** | Dwupoziomowy system perforowanych koszy

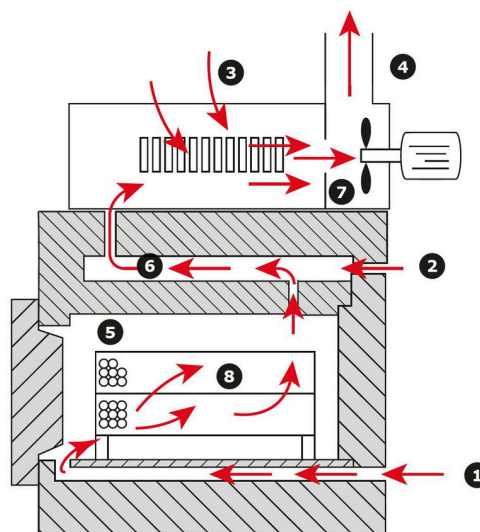

ABF 8/28

DANE TECHNICZNE

Maksymalna temperatura (°C)	800
Maksymalna temperatura pracy	700
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	210 x 290 x 445
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	980 x 600 x 750
Wysokość (łącznie z kominem) mm	1150
Konfiguracja	Do umiejscowienia na stole
Pojemność (litry)	28
Moc maksymalna (W)	8000
Moc nominalna (W)	3828
Termopara typu:	K
Waga (kg)	120

ABF

KONTAKT

[www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B)

POPROŚ O OFERTĘ

[www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B](http://www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B)



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielania/abf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections