


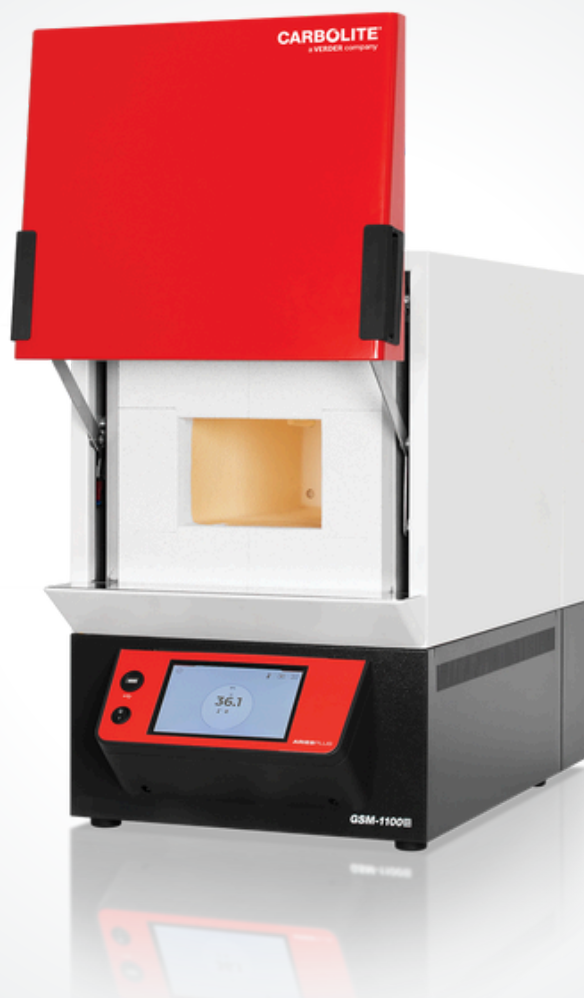

ПЕЧИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ И ОЗОЛЕНИЯ

GSM

www.carbolite.com/ru/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/gsm/


GSM

ПЕЧИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ И ОЗОЛЕНИЯ

Некоторые методики анализа могут быть чувствительны к пыли оксида алюминия и двуокиси кремния (Al_2O_3 или SiO_2) – материалов, обычно используемых для производства рабочих камер печей. Чтобы избежать воздействия данных материалов, камера печей серии GSM изготовлена из плавленного кварца.

Такая конструкция позволяет существенно снизить воздействие агрессивных и вызывающих коррозию паров таких веществ, как серная, азотная и соляная кислота, предотвращая контакт этих веществ с нагревательными элементами.

В дополнение к этому, при использовании специального газопускового отверстия (опция), закрытая конструкция печи минимизирует утечки газа из рабочей камеры.

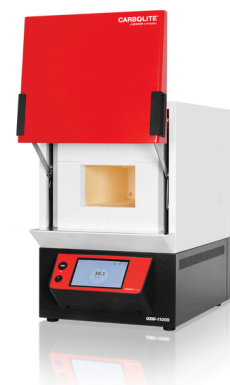

GSM

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Максимальная рабочая температура 1100°C
- Камера печи изготовлена из плавленного кварца, идеально подходит для анализов, в которых содержание Al_2O_3 или SiO_2 в образце могут негативно повлиять на результаты
- Заглушка для дверцы из формованного керамического волокна
- Контроллер Carbolite 301 с функцией линейного изменения температуры до заданного значения
- Корпус камеры обеспечивает превосходное удержание загрязняющих или коррозионных и агрессивных паров, таких как H_2SO_4 , HNO_3 , HCl
- 4 сторонний обогрев (2 стороны, свод, под)

GSM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Укажите при заказе.

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи - больше информации по ссылке
- Газовпускное отверстие для газа для работы с регулируемые газовыми средами (корпус из плавленного кварца повышает герметичность)
- Стойки и лотки для образцов

GSM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GSM 11/8
Максимальная температура (°C)	1100
Время нагрева (мин)	70
Рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы (°C)	1000
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	120 x 175 x 345
Габаритные размеры печи В x Ш x Г (мм)	670 x 435 x 750
Габаритные размеры с открытой дверцей В x Ш x Г (мм)	915 x 435 x 805
Высота до верха вытяжной трубы (мм)	1070
Объем (литров)	8
Максимальная мощность (Вт)	3050
Мощность поддержания температуры (Вт)	1700
Тип термопары	K
Вес (кг)	57

СКАЧАТЬ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ GSM → carbolite.com/files/451390/pasport-izdelia-gsm.pdf

ЧЕРТЕЖ GSM 11/8 → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ →

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ →

www.carbolite.com/ru/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

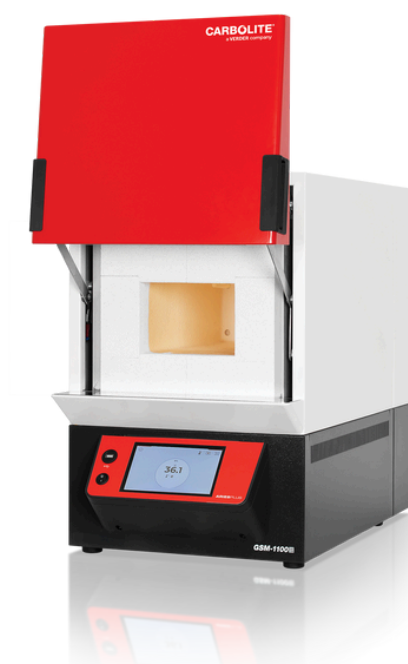

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ru/products/chamber-furnaces/ashing-furnaces/gsm/