


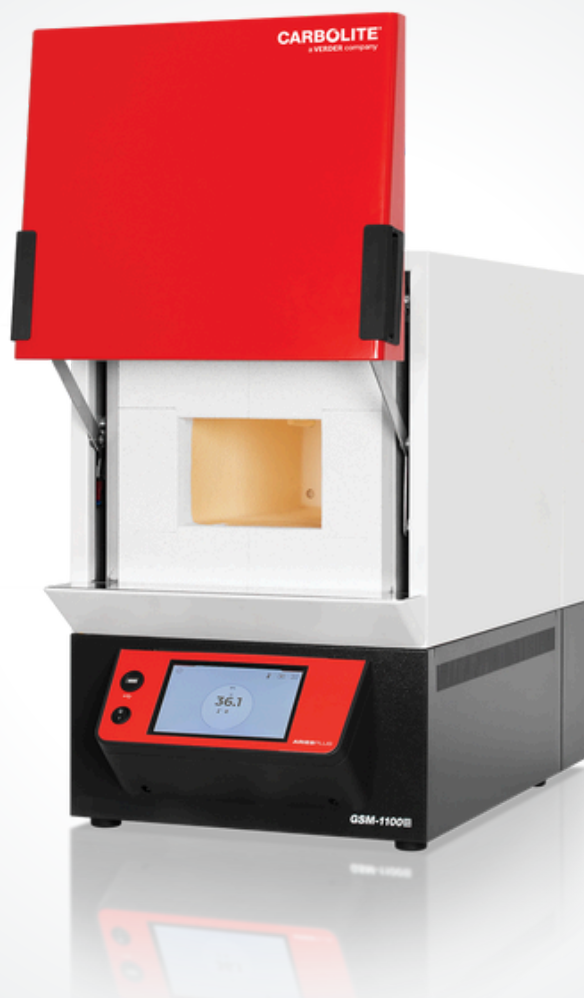

PIECE DO SPOPIELANIA I SPALANIA

GSM

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielania/gsm/


GSM

PIECE DO SPOPIELANIA I SPALANIA

Na niektóre techniki analityczne może mieć wpływ pył tlenku glinu lub krzemionki (Al_2O_3 przy SiO_2) - materiały zwykle używane do budowy komór piecowych. Aby tego uniknąć, komora pieca GSM jest zbudowana z materiału kwarcowego.

Ta konstrukcja oferuje również doskonałe powstrzymanie agresywnych i korozyjnych oparów, takich jak kwasy siarkowy, azotowy i solny, poprzez utrzymywanie ich z dala od elementów grzewczych.

Dodatkowo jeśli opcjonalny wlot gazu jest określony, zamknięta konstrukcja minimalizuje wycieki gazu z komory.

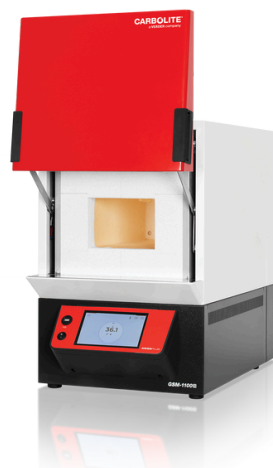

GSM

CECHY OGÓLNE

- | Maksymalna temperatura pracy: 1100 °C
- | Komora wykonana ze stopionego kwarcu, idealna gdy AL_2O_3 lub SiO_2 mogą zanieczyścić próbkę.
- | Izolacji drzwi wykonana z włókna ceramicznego
- | Carbolite sterownik 301, z pojedynczą rampą do wartości zadanej & timer procesowy
- | Wyłożenie wnętrza komory zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed żrącymi i agresywnymi oparami H_2SO_4 , HNO_3 , HCl
- | 4-stronne ogrzewanie (2 strony, dach, palenisko)

GSM

OPCJE

Proszę podać podczas zamawiania.

- | Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej - więcej informacji o kontrolerach.
- | Tacki i uchwyty załadownicze
- | Wlot gazu - możliwość pracy w zmienionej atmosferze

GSM

DANE TECHNICZNE

Model	GSM 11/8
Maksymalna temperatura (°C)	1100
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	70
Maksymalna temperatura pracy	1000
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	120 x 175 x 345
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	670 x 435 x 750
Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb.	915 x 435 x 805
Wysokość (łącznie z kominem) mm	1070
Pojemność (litry)	8
Moc maksymalna (W)	3050
Moc nominalna (W)	1700
Termopara typu:	K
Waga (kg)	57

DO POBRANIA

KARTA PRODUKTU GSM → carbolite.com/files/451438/karta-produktu-gsm.pdf

RYSUNEK GSM 11/8 → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

KONTAKT →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

POPROŚ O OFERTĘ →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

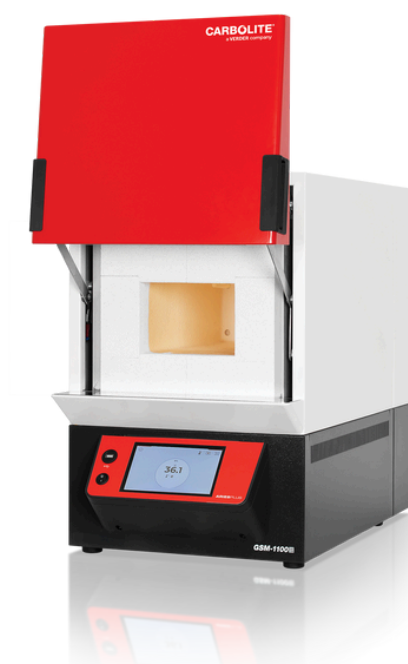

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielania/gsm/