


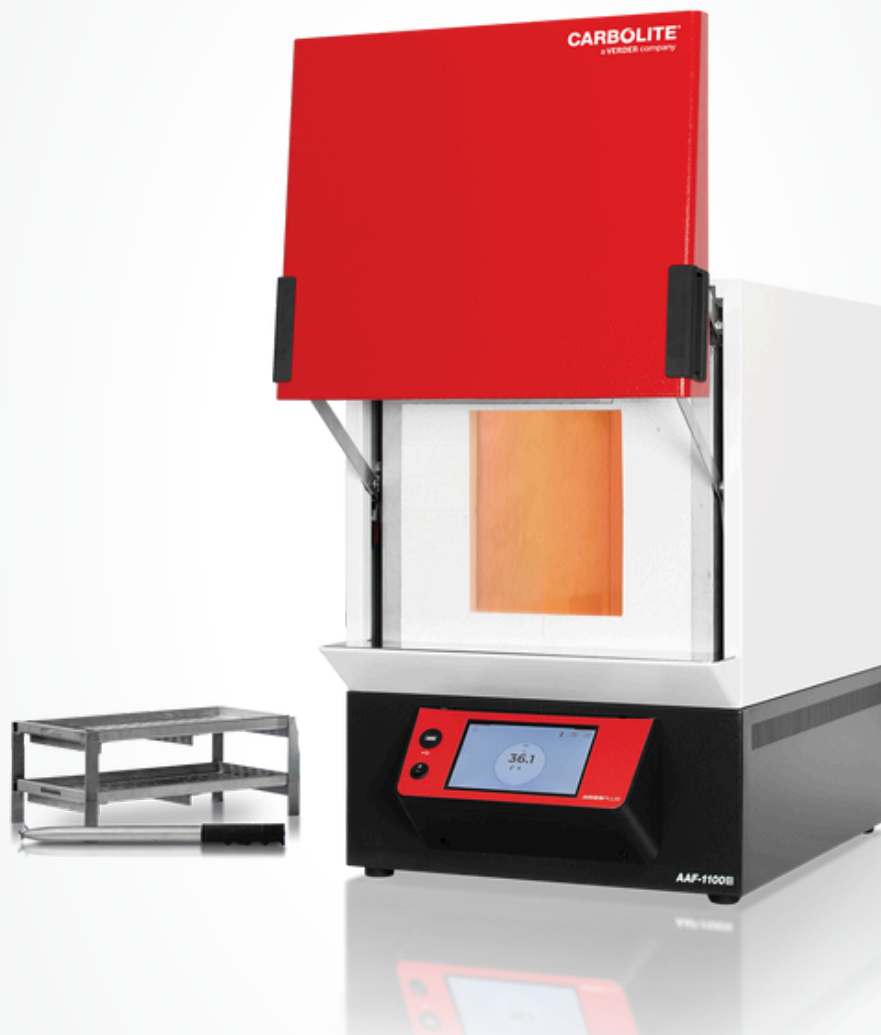

PIECE DO SPOPIELANIA

AAF – 18 | 32 LITROWY


www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielania/aaf-18-32-litres/

AAF – 18 I 32 LITROWY

PIECE DO SPOPIELANIA

Seria pieców do spopielenia AAF została zaprojektowana specjalnie w celu zapewnienia optymalnych warunków spopielenia, aby zapewnić całkowite spalanie próbki.

Dla tych laboratoriów, w których spopielenie przeplata się z innymi pracami obróbki cieplnej, piece do spopielenia AAF 12/18 & AAF 12/32 zapewniają wszystkie zalety konstrukcji AAF, ale z wyższą maksymalną temperaturą roboczą 1200 °C.

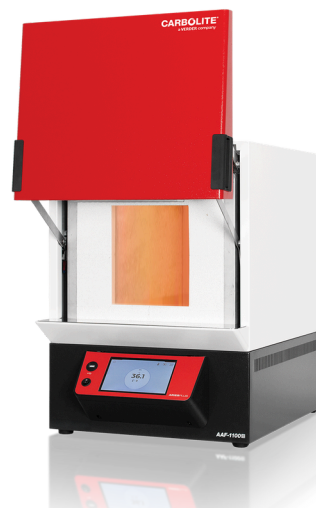

AAF – 18 I 32 LITROWY

CECHY OGÓLNE

- | Maksymalne temperatury robocze 1100 °C i 1200 °C
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Dwupoziomowy system regałów podwajający pojemność próbki
- | Z tacami na próbki i uchwytem umożliwiającym załadunek dużej ilości próbek
- | Idealne rozwiązanie dla spopielenia żywności, tworzyw sztucznych, węgla oraz innych związków węglowodorowych.
- | Wstępne podgrzewanie powietrza przed wejściem do komory
- | Elementy grzejne osłonięte poprzez zastosowanie płytek z węgla krzemu
- | Elementy grzejne umieszczone w bocznych ścianach komory
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF – 18 I 32 LITROWY

OPCJE

Proszę podać podczas zamawiania.

- I Dostępna jest gama zaawansowanych kontrolerów cyfrowych, programatorów wielosegmentowych i rejestratorów danych z opcjami komunikacji cyfrowej – więcej informacji o kontrolerach: www.carbolite.com/pl/produkty/sterowanie/
- I Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

AAF – 18 I 32 LITROWY

PRZYKŁADY



AAF – 18 I 32 LITROWY

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja	AAF 11/18	AAF 11/32	AAF 12/18	AAF 12/32
Maksymalna temperatura (°C)	1100	1100	1200	1200
Czas nagrzewania do temperatury maksymalnej	70	--	70	--
Maksymalna temperatura pracy	1000	1000	1100	1100
Wymiary: Wewnętrzne: Wys. x Szer. x Głęb.	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450
Wymiary: Zewnętrzne Wys. x Szer. x Głęb.	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775
Wymiary zewnętrzne z otwartymi drzwiami: Wys. x Szer. x Głęb.	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910
Wysokość (łącznie z kominem) mm	1000	1510	1000	1510
Pojemność (litry)	18	32	18	32
Moc maksymalna (W)	7080	9000	7080	9000
Moc nominalna (W)	3500	----	3500	----
Termopara typu:	K	R	R	R
Waga (kg)	70	100	70	100


AAF – 18 I 32 LITROWY

KONTAKT →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E

POPROŚ O OFERTĘ →

www.carbolite.com/pl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E

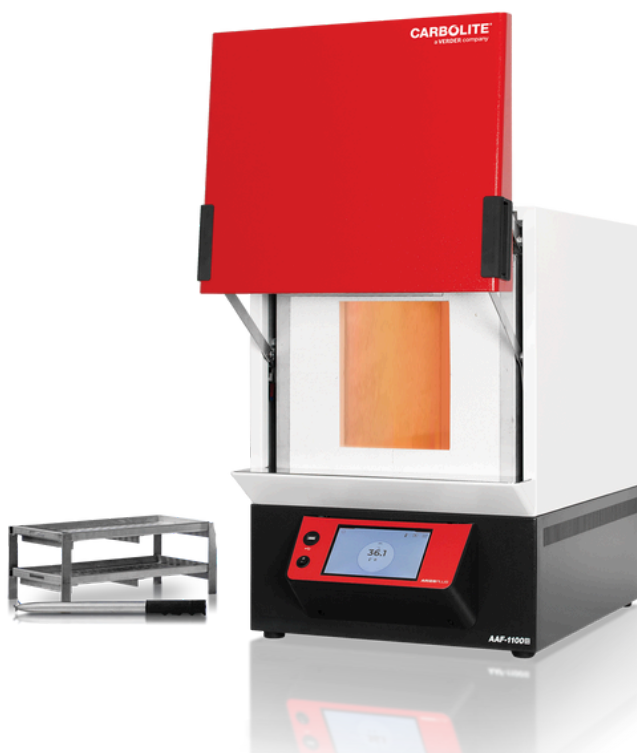

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pl/produkty/piece-komorowe/piece-komorowe-do-spopielenia/aaf-18-32-litres/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections