



CUPTOR DE CALCINARE CU POSTCOMBUSTIE

ABF

www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/abf/

ABF

CUPTOR DE CALCINARE CU POSTCOMBUSTIE

Cuptorul post-arzător pentru zgură ABF este adecvat mai ales calcinării probelor de dimensiuni mai mari sau materialelor precum biomasa, care sunt mai susceptibile să genereze cantități semnificative de fum.

Cuptorul include o cameră de combustie principală mare, echipată în mod standard cu un set dublu de coșuri pentru probe.

Substanțele evacuate din camera principală sunt procesate printr-un post-arzător cu temperatură înaltă proiectat să proceseze suplimentar vaporii și fumul.



ABF

CARACTERISTICI STANDARD

- | 800°C temperatură maximă de operare - camera de zgură
- | volumul camerei 28 litri
- | arzător post-proces pentru până la 40g carbon per sarcină de zgură
- | piese duble de susținere cu cuvă de încărcare și mâner
- | Sistem de control programabil, model EPC3016P1
- | controlul independent al temperaturii post-arzătorului până la 950°C
- | elemente înfășurate cu fir ecranat din carbid siliconic
- | furnizat cu alimentare trifazică ca standard
- | Conexiune Ethernet

ABF

OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.


- | Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală - mai multe informații despre sistemele de control disponibile: www.carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/
- | Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)
- | stand pardoseală opțional

ABF

DETALII TEHNICE

AIRFLOW IN THE ABF 8/28 ASHING FURNACE

- 1** | Air inlet – air is preheated before entering the chamber
- 2** | Air inlet into afterburner to ensure complete combustion
- 3** | Air inlet into plenum to cool the gases before entering the extraction fan
- 4** | Chimney
- 5** | Furnace chamber
- 6** | Afterburner
- 7** | Extraction fan
- 8** | Two tier perforated basket system

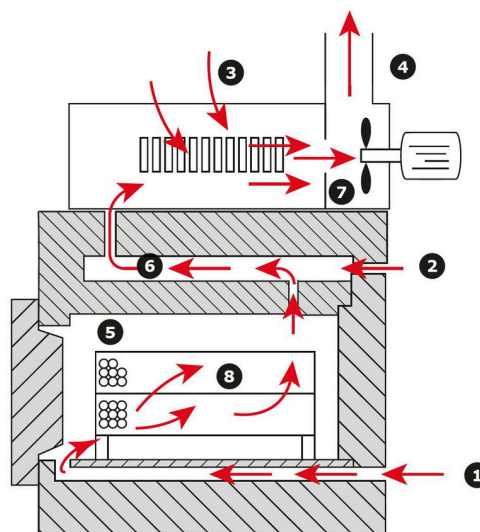

ABF 8/28

DATE TEHNICE

Temp. max. (°C)	800
Temperatura max. de operare continuă (°C)	700
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	210 x 290 x 445
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	980 x 600 x 750
Dimensiuni: Înălțimea coșului superior (mm)	1150
Configurație	Bancă superioară
Volum (litri)	28
Putere max. (W)	8000
Putere de lipire (W)	3828
Tip termocuplu	K
Greutate (kg)	120

ABF

CONTACTAȚI-NE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-B

SOLICITAȚI O COTAȚIE

www.carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-B



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/abf/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Conținutul poate fi supus modificărilor sau corecturilor