


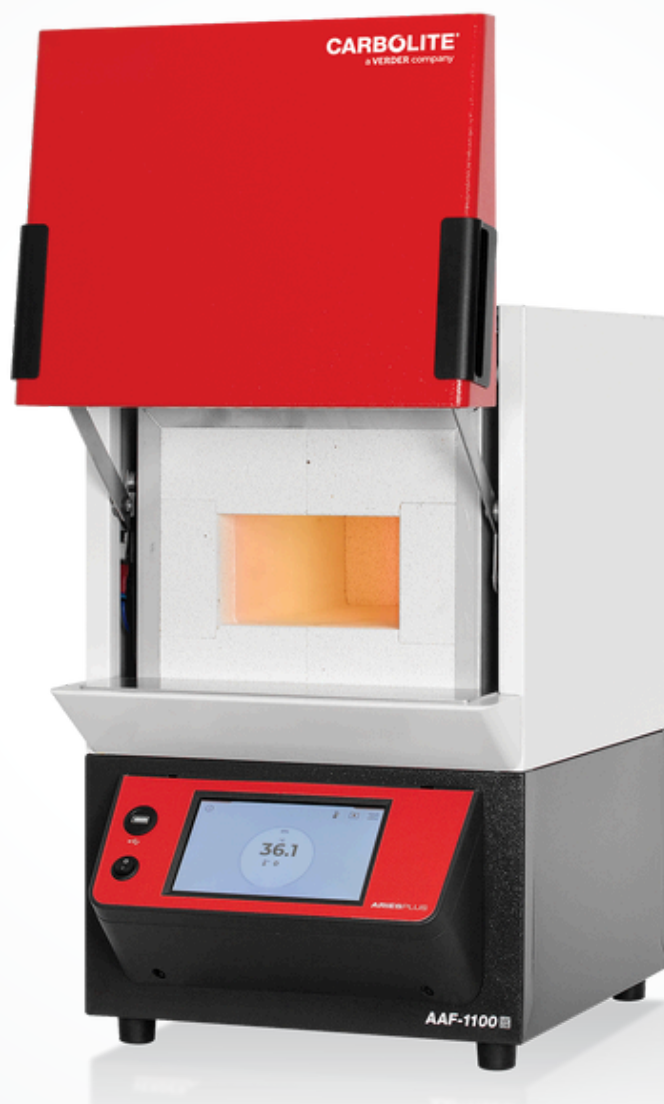

CUPTOR DE CALCINARE

AAF – 3 & 7 LITRI

carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-11-3-11-7/

AAF – 3 & 7 LITRI

CUPTOR DE CALCINARE

Gama de cuptoare AAF este proiectată special pentru oferi condițiile optime de calcinare care asigură arderea completă a probei.

Cuptoarele de calcinare AAF 11/3 și AAF 11/7 asigură un flux continuu de aer în camera cuptorului și sunt proiectate conform standardelor ISO 1171: 2010, ASTM D3174-04: 2010 și ASTM D4422.



AAF – 3 & 7 LITRI

CARACTERISTICI STANDARD

- | Temperatura maximă de operare: 1100 °C
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Ideal pentru obținerea zgurii din alimente, plastic, cărbune și alte materiale cu hidrocarburi
- | Proiectat conform cu ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 and ASTM D4422
- | Rezistențele de încălzire sunt protejate de deteriorarea chimică și mecanică printr-o căptușeală pe bază de alumina, rezistentă la uzură
- | Încălzire pe patru fețe (2 laterale, plafon & vatră)
- | admisie aer și coș înalt ce asigură un flux de aer de la 4 până la 5 schimburi pe minut
- | Înălțimea redusă a camerei menține fluxul de aer aproape de probe pentru o combustie optimă
- | Elementele puternice de încălzire, cu bobinaj gradat, reduc pierderea de căldură datorată schimbului mare de aer
- | Preîncălzirea aerului înainte de a intra în cameră conferă distribuția optimă a temperaturii
- | Tăvi cu mâner detașabil
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF – 3 & 7 LITRI


OPȚIUNI

Specificați opțiunile în momentul efectuării comenzii.

- | Gamă de sisteme de control digitale sofisticate, fiind disponibile opțional programe cu segmente multiple și înregistrare de date cu opțiune de transmitere digitală – mai multe informații despre sistemele de control disponibile: carbolite.com/ro/produse/optiuni-de-control/
- | Protecție la supra-temperatură (recomandată pentru protejarea conținutului de valoare și pentru funcționarea nesupravegheată)
- | alimentare electrică cu 2 faze pentru aaf 11/7

AAF – 3 & 7 LITRI

EXAMPLE

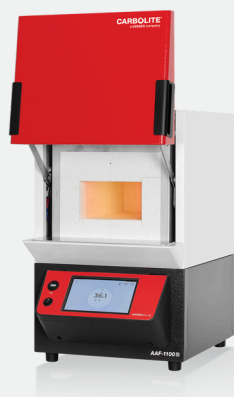

AAF 11/7



AAF 11/3

AAF – 3 & 7 LITRI

DATE TEHNICE

Specificații	AAF 11/3	AAF 11/7
Temp. max. (°C)	1100	1100
Timp de încălzire (min.)	155	155
Temperatura max. de operare continuă (°C)	1000	1000
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm)	90 x 150 x 250	90 x 170 x 455
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 750
Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 805
Dimensiuni: Înălțimea coșului superior (mm)	790	1070
Volum (litri)	3	7
Putere max. (W)	2100	4000
Putere de lipire (W)	1270	2624
Tip termocuplu	K	K
Greutate (kg)	22	63

FIȘĂ DE PRODUS → carbolite.com/files/451543/fisa-de-produs-aaf-3-7-litres.pdf


AAF – 3 & 7 LITRI

CONTACTAȚI-NE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-A

SOLICITAȚI O COTAȚIE →

carbolite.com/ro/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-A

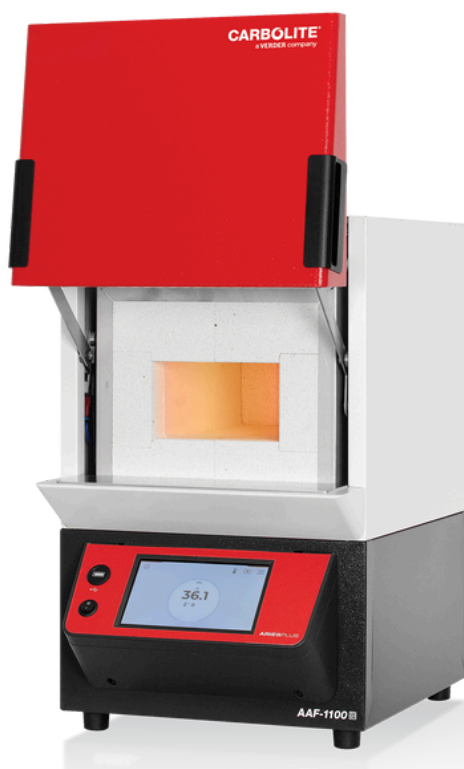

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

carbolite.com/ro/produse/cuptoare-tip-camera/cuptoare-de-calcinare/aaf-11-3-11-7/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections