


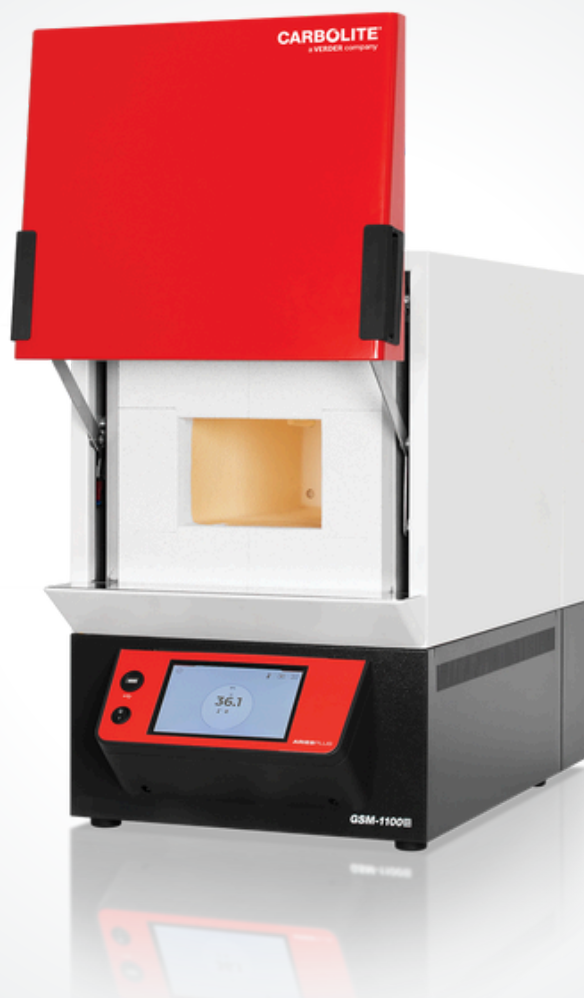

VERASSINGSOVEN MET GESMOLTEN KWARTSKAMER

GSM

www.carbolite.com/nl/producten/kamerovens/verassingsovens/gsm/


GSM

VERASSINGSOVEN MET GESMOLTEN KWARTSKAMER

Alumina (Al_2O_3) en silica (SiO_2) stofdeeltjes beïnvloeden sommige analysetechnieken. De meeste ovenkamers zijn echter gemaakt met deze materialen. Om dit te voorkomen is de GSM ovenkamer geconstrueerd uit gesmolten kwartsmateriaal.

Deze binnenkamer uit gesmolten kwarts beschermt de verwarmingselementen tegen agressieve en bijtende dampen zoals zwavelzuur, salpeterzuur en zoutzuur.

Een extra gastoevoer en de afgesloten kamer verminderen gaslekken uit de kamer.

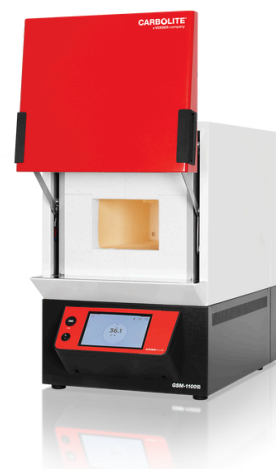

GSM

STANDAARD FUNCTIES

- | 1100°C maximale bedrijfstemperatuur
- | Carbolite 301 controller met enkelvoudige stijging naar ingestelde temperatuur en timer
- | Gesmolten kwartskamer, ideaal voor analyses waarbij Al_2O_3 of SiO_2 de testresultaten zouden kunnen contamineren
- | De binnenkant van de kamer biedt de beste bescherming tegen corrosieve en agressieve dampen zoals H_2SO_4 , HNO_3 , HCl .
- | Deurisolatie van keramische vezels
- | 4-zijdige verwarming (2 zijanten, boven- en onderkant)

GSM**OPTIES**

Te specificëren bij bestelling.

- Een reeks gesoftisticeerde digitale controllers, multisegment sturingen en data loggers met digitale communicatie opties is beschikbaar - meer informatie over controllers
- Gas-inlaat voor gemodificeerde atmosferen (de gesmolten kwartsbekleding geeft verbeterde bescherming)
- Monster leggers & rekken

GSM**TECHNISCHE GEGEVENS**

Model	GSM 11/8
Max temp (°C)	1100
Opwarmtijd (min)	70
Max doorlopende gebruikstemp (°C)	1000
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	120 x 175 x 345
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	670 x 435 x 750
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm)	915 x 435 x 805
Afmetingen: Hoogte tot bovenzijde schoorsteen (mm)	1070
Volume (liter)	8
Max vermogen (W)	3050
Werkvermogen (W)	1700
Thermokoppel type	K
Gewicht (kg)	57

DOWNLOADS

PRODUCTINFORMATIEBLAD GSM → carbolite.com/files/451709/productinformatieblad-gsm.pdf

LABORATORY/INDUSTRIAL OVENS & FURNACES → carbolite.com/files/12830/laboratory-industrial-ovens-furnaces.pdf

GSM 11/8 WITH NO CONTROLS SECTION → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

CONTACTEER ONS →

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

OFFERTE-AANVRAAG →

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

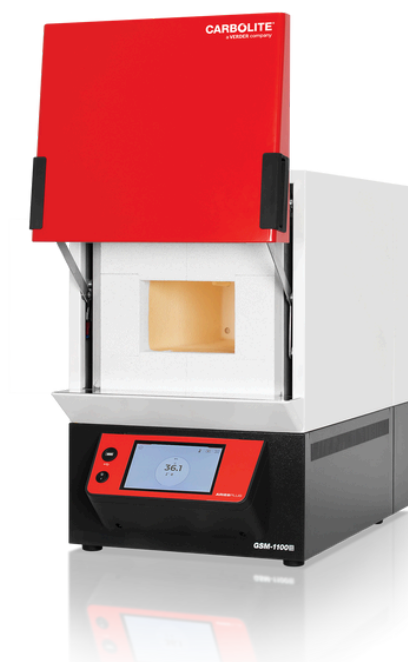

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/nl/producten/kamerovens/verassingsovens/gsm/