


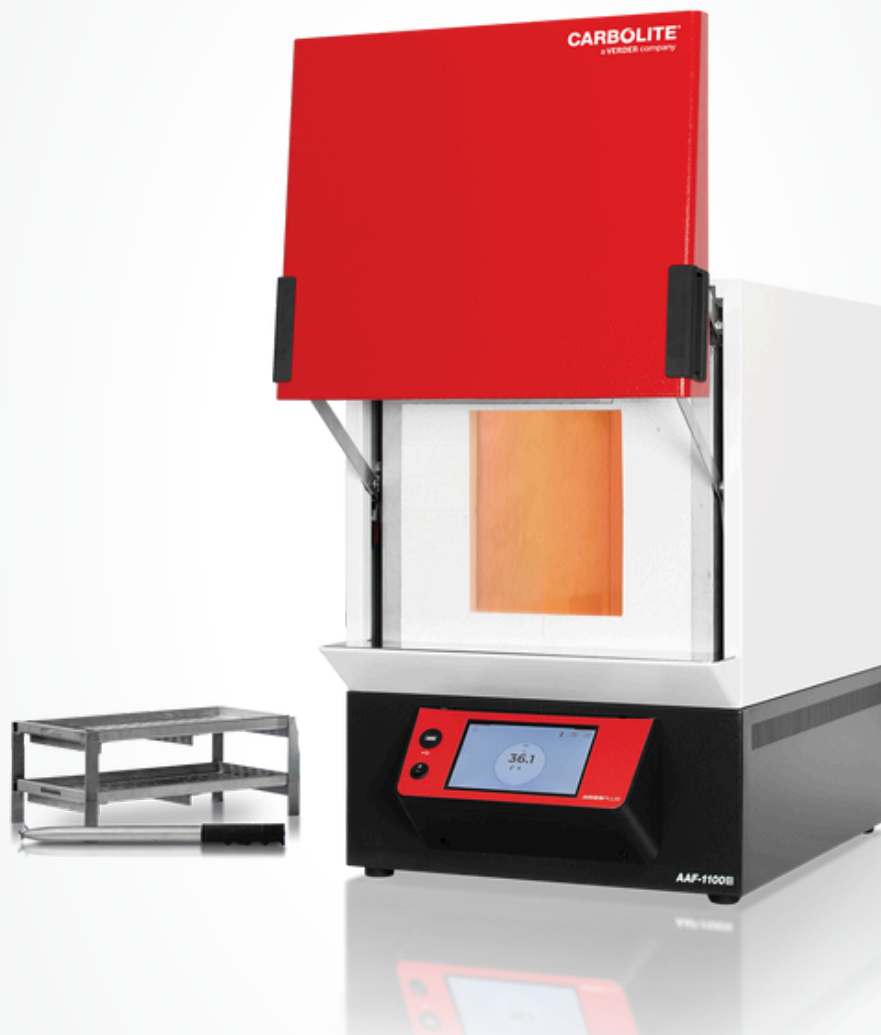

VERASSINGSOVEN


AAF - 18 & 32 LITER

www.carbolite.com/nl/producten/kamerovens/verassingsovens/aaf-18-32-litres/

AAF - 18 & 32 LITER**VERASSINGSOVEN**

De AAF verassingsovens zijn specifiek ontworpen om het verassingsproces te verbeteren en dus een volledige verbranding van het sample te verzekeren.

Voor die laboratoria die zowel willen verassen als andere warmtebehandelingen doen, zijn AAF12/18 en AAF 12/32 verassingsovens geschikt. Zij hebben alle voordelen van de verassingsovens en ook een hogere maximale bedrijfstemperatuur van 1200 °C.

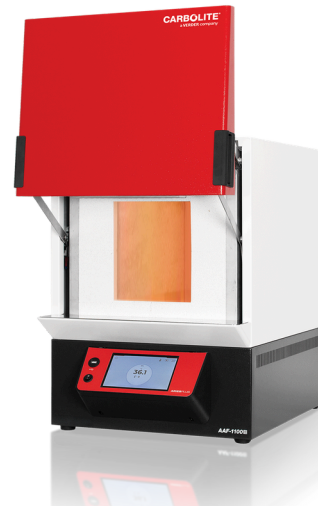**AAF - 18 & 32 LITER****STANDAARD FUNCTIES**

- | 1100 °C & 1200 °C maximale bedrijfstemperaturen
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Rekje met twee lagen om monstercapaciteit te verdubbelen
- | Met sample rekje en laadhendel is een groot aantal monsters mogelijk
- | Ideaal voor het verassen van levensmiddelen, kunststoffen, kolen & andere koolwaterstoffen
- | Voorverwarming van lucht
- | Siliciumcarbide tegels om de elementen tegen koolstofopbouw of corrosieve atmosfeer te beschermen
- | 2 zijdighe verwarming
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF - 18 & 32 LITER

OPTIES

Te specificëren bij bestelling.

- | Een reeks gesoftsticeerde digitale controllers, multisegment sturingen en data loggers met digitale communicatie opties is beschikbaar - meer informatie over controllers: www.carbolite.com/nl/producten/controle-opties/
- | Overtemperatuurbeveiliging (aanbevolen om waardevolle inhoud te beschermen & voor onbewaakte werking)

AAF - 18 & 32 LITER

VOORBEELDEN



AAF - 18 & 32 LITER

TECHNISCHE GEGEVENS

Specificatie	AAF 11/18	AAF 11/32	AAF 12/18	AAF 12/32
Max temp (°C)	1100	1100	1200	1200
Opwarmtijd (min)	70	--	70	--
Max doorlopende gebruikstemp (°C)	1000	1000	1100	1100
Afmetingen: Binnen H x B x D (mm)	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450
Afmetingen: Buiten H x B x D (mm)	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775
Afmetingen: Extern met deur open H x W x D (mm)	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910
Afmetingen: Hoogte tot bovenzijde schoorsteen (mm)	1000	1510	1000	1510
Volume (liter)	18	32	18	32
Max vermogen (W)	7080	9000	7080	9000
Werkvermogen (W)	3500	----	3500	----
Thermokoppel type	K	R	R	R
Gewicht (kg)	70	100	70	100


AAF - 18 & 32 LITER

CONTACTEER ONS →

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E

OFFERTE-AANVRAAG →

www.carbolite.com/nl/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E

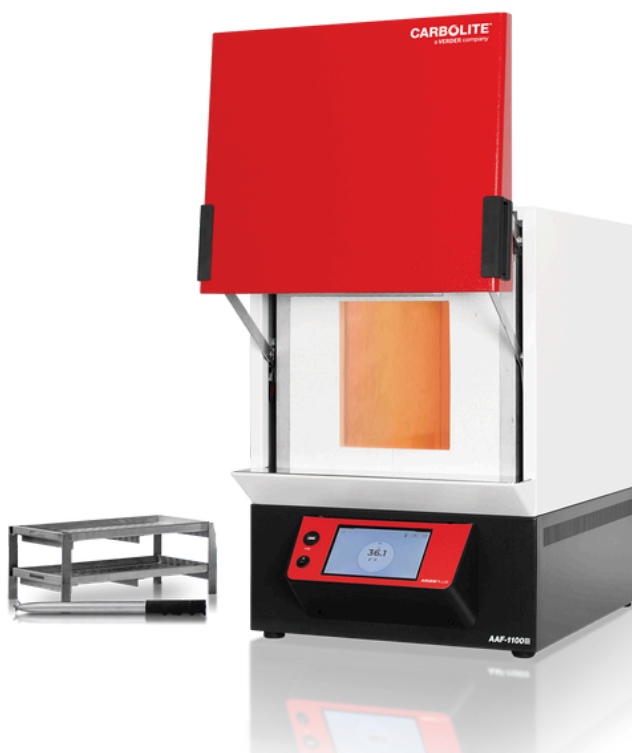

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/nl/producten/kamerovens/verassingsovens/aaf-18-32-litres/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections