



FORNO DE MATÉRIA VOLÁTIL

VMF

carbolite.com/pt/produtos/equipamento-de-teste-de-carvao-e-coque/vmf/


VMF**FORNO DE MATÉRIA VOLÁTIL**

O VMF é projetado especificamente para testar a matéria volátil do carvão.


DUAS CONFIGURAÇÕES DE FORNO

VMF / ASTM: para teste de ASTM D3175-11, completo com cadinho, tampa e suporte.

VMF 10/6: porta de elevação vertical de fechamento suave e portas de calibração para permitir que o termopar não revestido seja posicionado abaixo de cada cadinho.

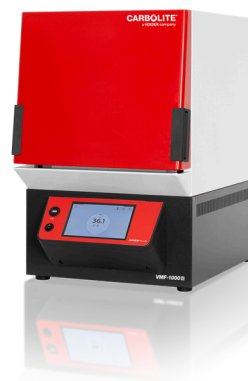**VMF****CARACTERÍSTICAS PADRÃO**

- | VMF / ASTM para teste de ASTM D3175-11
- | VMF / ASTM completo com cadinho, tampa e suporte
- | VMF 10/6 de fechamento suave, porta de elevação vertical
- | Portas de calibração VMF 10/6 para permitir que o termopar não revestido seja posicionado abaixo de cada cadinho

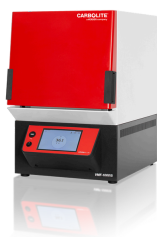

VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPÇÕES

Especifique no momento do pedido.

- | Cadinhos e tampas acessórios disponíveis
- | Rack com 4 cadinhos e alça de carregamento (para VMF 10/6)
- | Proteção contra superaquecimento
- | Comunicações digitais ou registrador gráfico sem papel nanodac para fornecer evidências documentais do procedimento de teste (para VMF 10/6)
- | Sonda termopar calibrada opcional com indicador digital (para VMF 10/6)

VMF

CADINHOS E SUPORTES



Suporte opcional de 4 cadinhos + 4 cadinhos com tampas (VMF 10/6)



Cadinho opcional com tampa (VMF 10/6)



Cadinho e tampa de iniconel resistentes à corrosão e oxidação (VMF / ASTM) – fornecidos com o forno



SUPORTE DE CADINHO DE ARAME

Suporte de cadinho de arame padrão mostrado com cadinho e tampa (VFM / ASTM) – fornecido com o forno.

VMF

DADOS TÉCNICOS

VMF 10/6

Temp. máx. (°C)	1000
Temperatura máxima de operação contínua (°C)	950
Tipo	Carregamento frontal
Tempo de aquecimento (minutos)	20 to 900°C
Dimensões: Interno A x L x P (mm)	100 x 210 x 260
Dimensões: Externo A x C x P (mm)	670 x 435 x 608
Potência máx. (W)	3000
Tipo de termopar	K
Peso (kg)	47
Fonte de alimentação	220 – 240 V, 50 a 60 Hz, monofásico, 13 A

VMF/ASTM

Temp. máx. (°C)	1000
Temperatura máxima de operação contínua (°C)	1000
Tipo	Carregamento superior
Tempo de aquecimento (minutos)	Não especificado
Dimensões: Interno (mm)	50 x 100
Dimensões: Externo A x C x P (mm)	330 x 410 x 300
Potência máx. (W)	950
Tipo de termopar	N
Peso (kg)	9
Fonte de alimentação	220 – 240 V, 50 – 60 Hz, alimentação monofásica e neutro com conexão de aterramento de proteção, 4 A

VMF

DOWNLOADS

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO VMF → carbolite.com/files/451861/ficha-tecnica-do-produto-vmf.pdf

COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

CONTATO →

carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO →

carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

carbolite.com/pt/produtos/equipamento-de-teste-de-carvao-e-coque/vmf/

© Carbolite Gero – carbolite.com / O conteúdo pode estar sujeito a modificações ou correções