


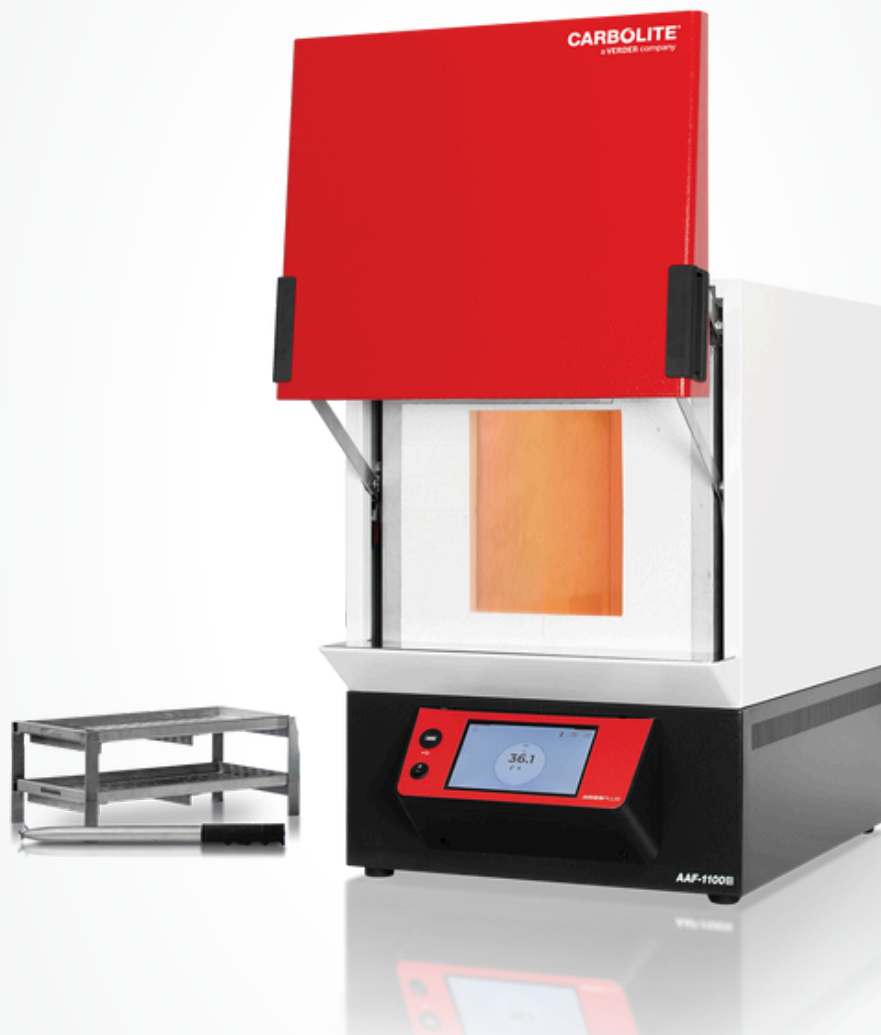

FORNO DE INCINERAÇÃO

AAF – 18 & 32 LITRES

www.carbolite.com/pt/produtos/fornos-de-camara/fornos-de-cinzas/aaf-18-32-litres/

AAF – 18 & 32 LITRES

FORNO DE INCINERAÇÃO

A linha do forno de incineração AAF é projetada especificamente para fornecer condições ideais de incineração para garantir a combustão completa da amostra.

Para os laboratórios onde a incineração é intercalada com outro trabalho de tratamento térmico, o forno de incineração AAF 12/18 e AAF 12/32 oferece todas as vantagens do projeto AAF, mas com uma temperatura máxima de operação de 1200 ° C.

**AAF – 18 & 32 LITRES**

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- | Temperaturas operacionais máximas de 1100 °C e 1200 °C
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | Sistema de rack de duas camadas dobrando a capacidade da amostra
- | Com bandejas de amostra e alça de carregamento permite um grande número de amostras
- | Ideal para incinerar alimentos, plásticos, carvão e outros materiais de hidrocarbonetos
- | Pré-aquecimento do ar antes de entrar na câmara
- | Proteção dos elementos do acúmulo de carbono ou atmosfera corrosiva, usando revestimento de carboneto de silício
- | Aquecimento de 2 lados
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF – 18 & 32 LITRES

OPÇÕES

Especifique no momento do pedido.

- Uma variedade de controladores digitais sofisticados, programadores multissegmentos e registradores de dados com opções de comunicação digital está disponível – mais informações sobre controladores: www.carbolite.com/pt/produtos/opcoes-de-controladores/
- Proteção contra superaquecimento (recomendado para proteger conteúdos valiosos e para operação autônoma)

AAF – 18 & 32 LITRES

EXEMPLOS



AAF – 18 & 32 LITRES

DADOS TÉCNICOS

Especificação	AAF 11/18	AAF 11/32	AAF 12/18	AAF 12/32
Temp. Máx. (°C)	1100	1100	1200	1200
Tempo de aquecimento (minutos)	70	--	70	--
Temperatura máxima de operação contínua (°C)	1000	1000	1100	1100
Dimensões: Interno A x C x P (mm)	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450
Dimensões: Externo A x C x P (mm)	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775
Dimensões: Externa com porta aberta A x L x P (mm)	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910
Dimensões: Altura até o topo da chaminé (mm)	1000	1510	1000	1510
Volume (litros)	18	32	18	32
Potência máx. (W)	7080	9000	7080	9000
Força de retenção (W)	3500	----	3500	----
Tipo de termopar	K	R	R	R
peso (kg)	70	100	70	100


AAF – 18 & 32 LITRES

CONTATO →

www.carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO →

www.carbolite.com/pt/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E

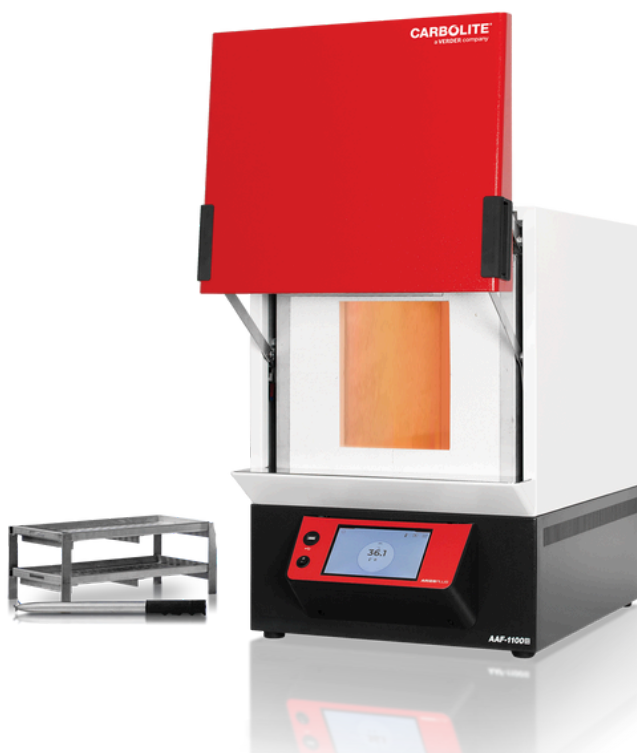

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/pt/produtos/fornos-de-camara/fornos-de-cinzas/aaf-18-32-litres/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections