


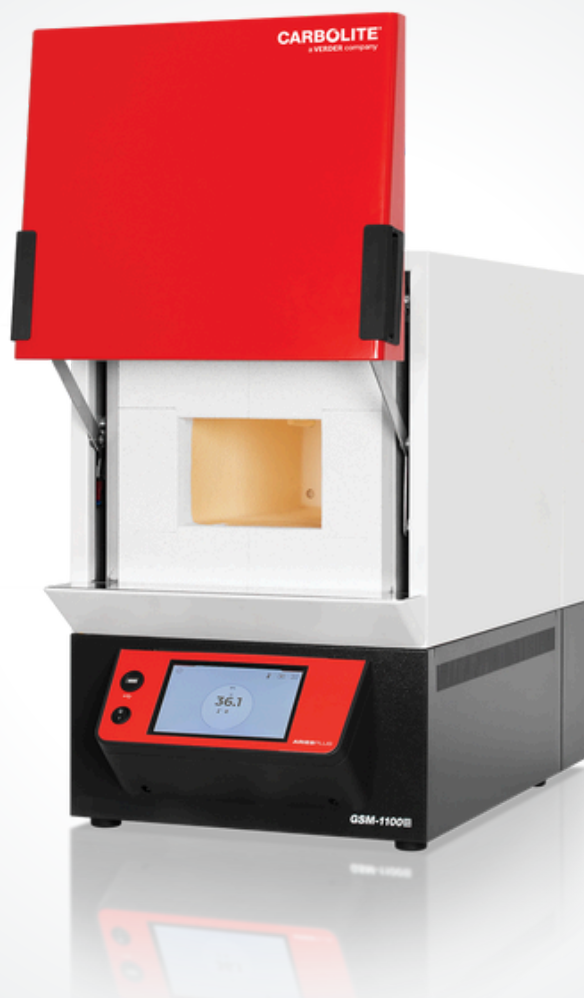

SPECIÁLIS HAMVASZTÓKEMENCÉK

GSM

www.carbolite.com/hu/termek/kamras-kemencek/hamvaszto/gsm-specialis/


GSM

SPECIÁLIS HAMVASZTÓKEMENCÉK

Némely analitikai technikát zavarhatja az alumínium- vagy szilícium-oxid, melyből készült kerámiaszál gyakran használnak szigetelőanyagként a kemencékben. Ezen anyagok kiporzása elkerülése érdekében speciális kvarcüvegből készül a Carbolite cég GSM kemence kamrája.

A kemence kialakítása kitűnő ellenállóképességet biztosít a kénsav, salétromsav és sósav agresszív és korrózív gőzeivel szemben, mivel távoltarja tőlük a fűtőelemeket.

Ráadásul, ha a kemencében még opcionális gázbevezetést is kialakítanak, akkor a tömített kialakítás minimalizálja a gázszivárgást a kamrából.

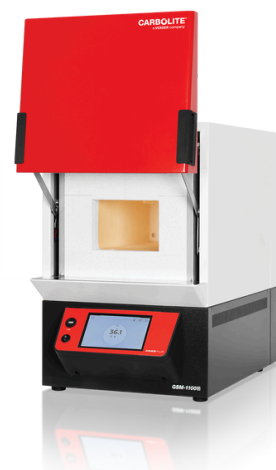

GSM

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- max. hőmérséklet 1100°C
- Carbolite 301 hőmérséklet szabályozó: állítható sebességű felfűtés beállított hőmérsékletre és időkapcsoló
- kvarcüveg kemencekamra, ideális olyan vizsgálatokhoz, melyeknél az Al_2O_3 vagy SiO_2 elszennyezhetné a teszteredményeket
- a kamra speciális bélelése kitűnő ellenállást biztosít a H_2SO_4 , HNO_3 , HCl agresszív és korrózív gőzeivel szemben
- ömlesztett kerámiaszál ajtószigetelés
- fűtés négy oldalról (2 oldal, alul, fölül)

GSM

OPCIÓK (MÁR A RENDELÉSKOR MEGADANDÓK)

- I többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal - további információk
- I opcionális gázbevezetés
- I opcionális mintatartó tálcák és állványok

GSM

MŰSZAKI ADATOK

Modell	GSM 11/8
Max. hőmérséklet (°C)	1100
Felfűtési idő (perc)	70
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1000
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	120 x 175 x 345
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	670 x 435 x 750
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm)	915 x 435 x 805
Méreték: magasság a kémény tetejéig (mm)	1070
Kamratérfogat (liter)	8
Max. teljesítmény (W)	3050
Hőntartási teljesítményfelvétel (W)	1700
Hőelem típusa	K
Súly (kg)	57

LETÖLTÉSEK

TERMÉK ADATLAP GSM → carbolite.com/files/451948/termek-adatlap-gsm.pdf

GSM 11/8 RAJZ → carbolite.com/files/52682/gsm-11-8-with-no-controls-section.pdf


GSM

KAPCSOLATFELVÉTEL →

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-C

AJÁNLATKÉRÉS →

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-C

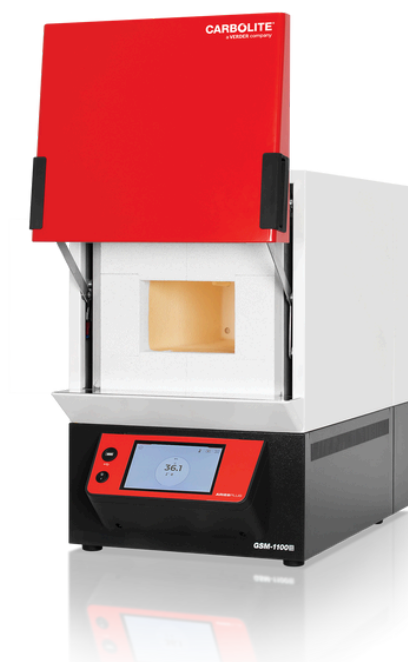

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/hu/termek/kamras-kemencek/hamvaszto/gsm-specialis/