


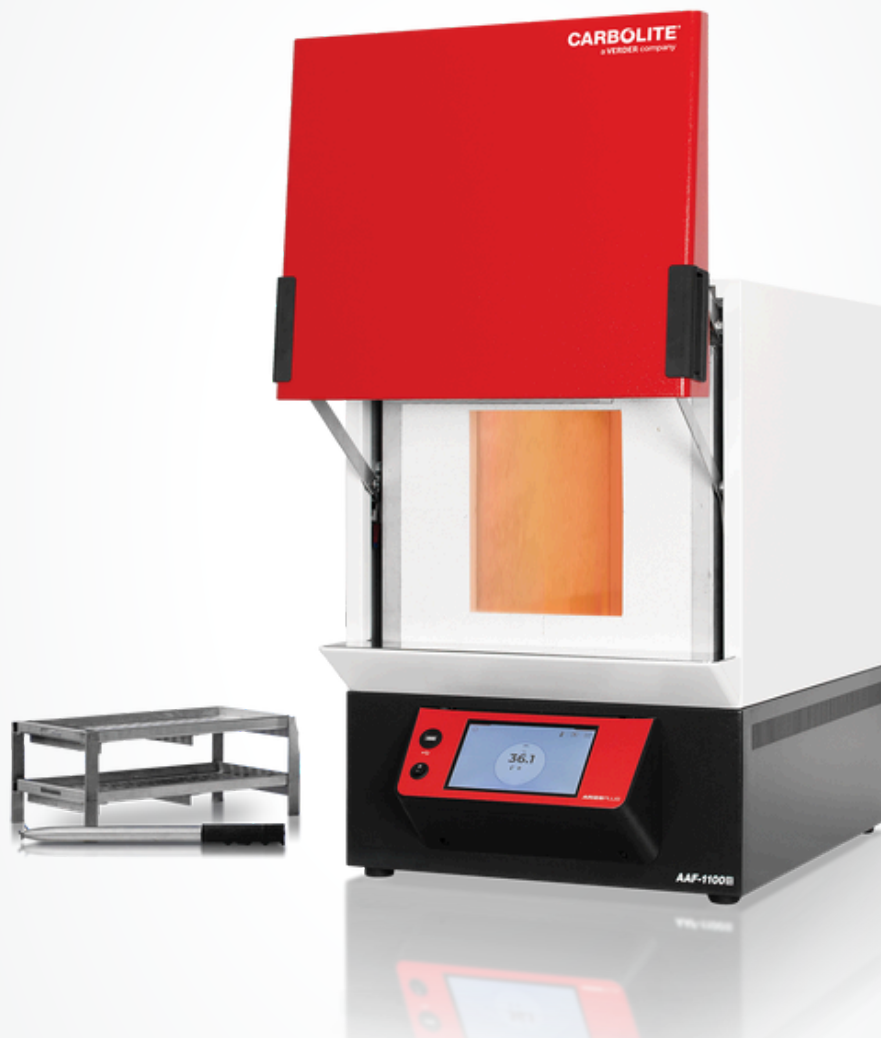

HAMVASZTÓKEMENCÉK

AAF – 18 ILL. 32 LITERES

www.carbolite.com/hu/termek/kamras-kemencek/hamvaszto/aaf-18-ill-32-literes/

AAF – 18 ILL. 32 LITERES

HAMVASZTÓKEMENCÉK

Az AAF (ashing furnace) hamvasztókemencék speciális kialakítása a minta teljes elégését garantáló optimális hamvasztási körülményeket biztosítja.

Azon laboratóriumok számára, melyek a hamvasztás mellett még magas hőmérsékletet igénylő egyéb hőkezelési eljárást is alkalmaznak az AAF 12/18 és AAF 12/32 kemencék az AAF kialakítás összes előnyén túl még az 1200 °C-os magasabb hőmérsékletet is kínálják.



AAF – 18 ILL. 32 LITERES

ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI

- | max. hőmérséklet 1100 °C és 1200 °C
- | Programmable EPC3016P1 controller
- | emeletes mintatartó megduplázza a kapacitást
- | mintatartók és fogó a nagyszámú mintához
- | élelmiszerek, műanyagok, szenek és egyéb szénhidrogének hamvasztására ideális
- | levegő előmelegítődik a kamrába lépés előtt
- | kemence fűtőelemeit szilícium-karbid cserpék védik a szénlerakódástól és korrozív gázoktól
- | fűtőelemek a kamra két oldalán
- | Soft closing door protects the thermal insulation

AAF – 18 ILL. 32 LITERES

OPCIÓK

Már a rendeléskor megadandók.

- I többféle nagyteljesítményű digitális, szegmensenként programozható hőmérsékletszabályozó és adatgyűjtő digitális kommunikációs opciókkal – további információk: www.carbolite.com/hu/termek/homersekletszabalyozok/
- I túlhevülés elleni védőkapcsoló (értékes minták védelméhez és felügyelet nélküli működtetéshez ajánlott)

AAF – 18 ILL. 32 LITERES

PÉLDÁK



AAF – 18 ILL. 32 LITERES

MŰSZAKI ADATOK

Jellemző	AAF 11/18	AAF 11/32	AAF 12/18	AAF 12/32
Max. hőmérséklet (°C)	1100	1100	1200	1200
Felfűtési idő (perc)	70	--	70	--
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1000	1000	1100	1100
Méreték: belül mag x szél x mély (mm)	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450	235 x 196 x 400	250 x 280 x 450
Méreték: kívül mag x szél x mély (mm)	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775	715 x 505 x 680	820 x 690 x 775
Külső méretek nyitott ajtóval: mag x szél x mély (mm)	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910	1000 x 505 x 765	1115 x 690 x 910
Méreték: magasság a kémény tetejéig (mm)	1000	1510	1000	1510
Kamratérfogat (liter)	18	32	18	32
Max. teljesítmény (W)	7080	9000	7080	9000
Hőntartási teljesítménynyelvétel (W)	3500	----	3500	----
Hőelem típusa	K	R	R	R
Súly (kg)	70	100	70	100


AAF – 18 ILL. 32 LITERES

KAPCSOLATFELVÉTEL →

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ACF-E

AJÁNLATKÉRÉS →

www.carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ACF-E

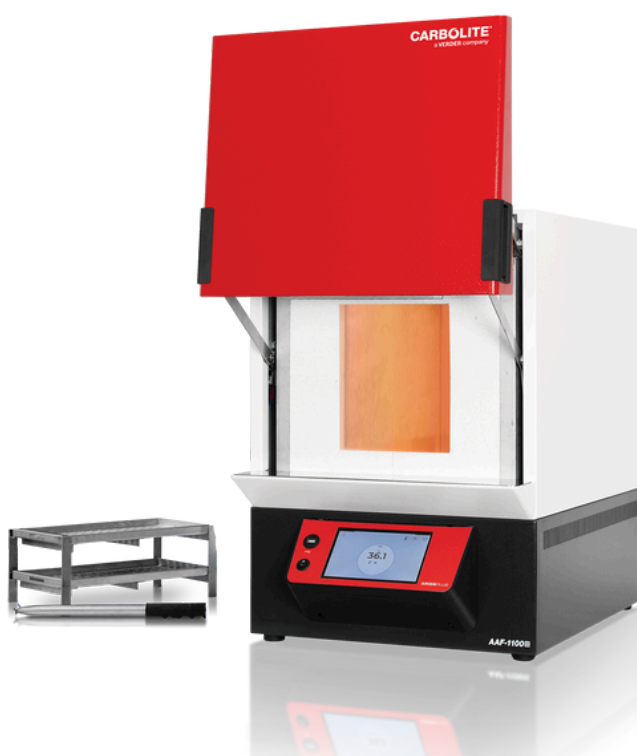

CARBOLITE[®]
a **VERDER** company

www.carbolite.com/hu/termek/kamras-kemencek/hamvaszto/aaf-18-ill-32-literes/

© Carbolite Gero – www.carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections