



KEMENCÉK ILLÉKONY KOMPONENSEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

VMF

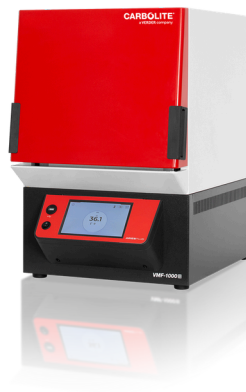
carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/vmf-illekony-komponensek/

VMF**KEMENCÉK ILLÉKONY KOMPONENSEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ**

A VMF (volatile matter furnace) kemencét speciálisan a szén illékony komponensei meghatározására fejlesztették ki.

A vizsgálati módszerek megfelelnek az ISO 562 és az ASTM D3175 szabványnak; e két eljárás a szén minőségének és szennyezettségének meghatározására szolgál.

Tégelyben lévő mintát a kemencébe helyezik. A jól tömítő tégelyfedélen átjutó illékony komponenseket analizálják, mielőtt azok oxidálódnának.

**VMF****ALAPKIÉPÍTÉS JELLEMZŐI**

- | VMF / ASTM kemence ASTM D3175-11 szabvány szerint
- | VMF / ASTM kemence teljesen tégellyel, fedéllel és tégelyfogóval
- | VMF 10/6 lágyan záródó, függőlegesen eltolódó ajtó
- | VMF 10/6 kemence: kalibrálónyílások az egyes tégelyek alá helyezhető hőelemek bevezetéséhez



VMF 10/6



VMF 10/6

VMF

OPCIÓK

Már a rendeléskor megadandók.

- | további tégelyek és tégelyfedők
- | VMF 10/6 kemence: állvány 4 tégelyhez
- | Túlhevülés elleni védőkapcsoló
- | VMF 10/6 kemence: digitális PID hőmérsékletszabályozók és regisztrálóberendezések széles választéka
- | VMF 10/6 kemence: opcionális kalibrált hőelem digitális kijelzővel

VMF

TÉGELYEK ÉS TARTÓK



Opcionális tégelytartó 4 tégely számára + 4 tégely fedéllel (VMF 10/6)



Opcionális tégely fedéllel (VMF 10/6)



Korrózió- és oxidációálló Inconel tégely & fedéllel (VMF/ASTM) – kemence alapkiépítéséhez tartozik



DRÓTOS TÉGELYTARTÓ

Standard drótos tégelytartó (képen fedeles tégellyel együtt) (VMF/ASTM) – kemence alapkiépítéséhez tartozik.

VMF

MŰSZAKI ADATOK

VMF 10/6

Max. hőmérséklet (°C)	1000
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	950
Típus	elől töltős
Felfűtési idő (perc)	20 (900°C-ra)
Méreték: belül mag × szél × mély (mm)	100 × 210 × 260
Méreték: kívül mag × szél × mély (mm)	670 × 435 × 608
Max. teljesítmény (W)	3000
Hőelem típusa	K
Súly (kg)	47
Elektromos csatlakozás	220 – 240V, 50–60Hz, 1-fázis, 13A

VMF/ASTM

Max. hőmérséklet (°C)	1000
Folyamatos üzem max. hőmérséklete (°C)	1000
Típus	felül töltős
Felfűtési idő (perc)	—
Méreték: belül (mm)	50 × 100
Méreték: kívül mag × szél × mély (mm)	330 × 410 × 300
Max. teljesítmény (W)	950
Hőelem típusa	N
Súly (kg)	9
Elektromos csatlakozás	220 – 240V, 50 – 60Hz, 1-fázis és földelt fázis, 4A

VMF

LETÖLTÉSEK

TERMÉK ADATLAP VMF → carbolite.com/files/451986/termek-adatlap-vmf.pdf**COAL, COKE & IRON ORE TESTING FURNACES** → carbolite.com/files/17033/coal-coke-iron-ore-testing-furnaces.pdf

VMF

KAPCSOLATFELVÉTEL →

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-ASF-B

AJÁNLATKÉRÉS →

carbolite.com/hu/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-ASF-B



CARBOLITE®
a **VERDER** company

carbolite.com/hu/termek/szen-es-kokszvizsgalok/vmf-illekony-komponensek/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections